

Tectus

User Guide

TEC-L, TEC-R

EN	User Guide	2
NO	Brukerhåndbok	30

Contents2

1 Description and Intended Purpose3

2 Safety Information4

3 Component Identification6

4 Maintenance7

4.1 Critical Service Indicator8

4.2 Hard Reset8

4.3 Cleaning8

4.4 Replacing the Key Fob Battery9

5 Limitations on Use 10

6 Battery Charging 11

6.1 Battery Charging Safety Information 11

6.2 Before Charging 12

6.3 On-Screen Battery Level Indicator 12

6.4 Connecting and Disconnecting the Charger 13

6.5 Battery Charger LED Indications 14

6.6 Charging and Operating Reference Times 14

7 How to Don and Doff the Tectus KAFO 15

7.1 Donning the Tectus KAFO 15

8 Turning the Device ON/OFF 16

7.2 Doffing the Tectus KAFO 16

9 Tectus Knee Module Operation 18

9.1 User Modes 18

9.2 Safety While Switching Between User Modes 18

9.3 Device Over-Stress Warning 19

9.4 Activities and Associated User Modes 20

9.5 Operating Actions and Device Indications 24

9.6 Mode Switching on the Device Using Tectus Module Buttons A and/or B 25

9.7 Mode Switching on the Device Using The Key Fob 26

9.8 Additional Key Fob Functions 26

9.9 Mechanical Override Operation 27

10 Transport and Storage 27

Manufacturer’s Declarations and Legal Information 28



Please read all safety warnings in Section 2 and 6 before using the device.

1 Description and Intended Purpose

These instructions are for the user (wearer) only.

The term *device* is used throughout these instructions for use to refer to Tectus.

Note... Tectus is a knee system comprising the Tectus knee module, battery pack and other Blatchford components that make up your brace, or KAFO (Knee-Ankle-Foot Orthosis). The ankle joint is not manufactured by Blatchford and therefore not covered by these instructions for use. Refer to the ankle manufacturer's documentation.

Make sure that you understand all instructions for use, drawing particular attention to all maintenance and safety information sections.

Application

This device is to be used exclusively as part of a lower limb orthosis.

Intended for a single user.

The microprocessor-controlled device is configured by your practitioner for your individual gait needs and adapts in real time to your current motion situation, allowing you to undertake activities such as walking, standing, sitting and descending stairs.

You can control the device manually by switching it between different operating modes for different activities, using the A and B mode control buttons on the device and/or control buttons on a key fob. The practitioner can also use these controls, in conjunction with Blatchford App, to customize device operation to suit your requirements.

The device has a mechanical override button which allows knee flexion while pressed.

In the event of any malfunction of the electronic or the hydraulic control system, or when the battery is fully discharged, the device automatically switches to a **Safety** mode. In this **Safety** mode the device reverts to pre-programmed resistance parameters and allows only limited functionality. Normal operation resumes when the device is first time powered on after the malfunction has been resolved, or the battery has been recharged. See Section 4.1 *Critical Service Indicator* and Section 6.3.2 *Low Battery Behavior*.




2 Safety Information

-  This warning symbol highlights important safety information which must be followed carefully.
-  Contact your practitioner if your condition changes.
-  Regularly check the limb on which the Tectus KAFO is worn for signs of skin irritation, tissue damage, pressure sores or discomfort and report any such signs to your practitioner.
-  Assembly, programming, maintenance and repair of the device (including handling and replacement of the battery unit) must only be carried out by a suitably qualified practitioner or technician that has attended an approved training course.
-  Be aware of finger trap hazards at all times.
-  Do not place near any heat source. Do not leave in direct sunshine or inside a car in hot weather.
-  Avoid strong magnetic fields, radioactive environments, sources of electrical interference, atmospheres containing liquids and/or powders.
-  Do not wear the device during any scanning procedures (e.g. X-ray, CT or MRI scan).
-  The device is not intended for use when immersed in water or as a shower orthosis. If the orthosis comes into contact with water remove and dry immediately.
-  Any excessive changes in heel height after programming will adversely affect the function of the orthosis. Only footwear approved by the practitioner should be used with the orthosis.
-  Advise your practitioner if you use a pacemaker or any other electronic medical equipment before using the device.
-  Ensure no water enters the charger plug socket and the cover is only removed during charging.
-  See also additional safety information in Section 6.1 *Battery Charging Safety Information*.
- Observe the following warnings when using the device:
-  Any changes in the performance or function of the device e.g. restricted movement, non-smooth motion or unusual noises should be immediately reported to your practitioner or service provider.
-  Ensure only suitably retrofitted vehicles are used when driving. All persons are required to observe their respective driving laws when operating motor vehicles. While wearing the orthosis, the leg on which the orthosis is worn must not be used to control the vehicle or its components (e.g. clutch pedal, brake pedal, accelerator).
-  You must not operate heavy machinery while wearing the device.
-  Always use a handrail when ascending and descending stairs and at any other time if available.
-  Leg-over-leg stairs descent should only be undertaken if you have received suitable training and have been approved to do so by your practitioner. Otherwise a step-to-step gait should be used descending stairs.

-  When starting to walk, you should always lead with the unaffected leg. If walking is initiated with the braced limb, the device may not recognize the movement and as a safety measure will switch to *Lock* mode.
-  Confirm that *Stairs* mode is engaged before attempting to descend stairs.
-  Confirm that *Sit* mode is engaged before attempting to sit.
-  The device must not be used for unusual activities, including, for example, extreme sports (free climbing, parachuting, paragliding, etc.), sport activities that involve jumping, sudden movements or fast sequences of steps (e.g., running, cycle racing, basketball, badminton, ice and snow sports) or extreme slopes and steps.
-  Avoid, where possible, using the device on slippery, uneven or unfirm surfaces (sand, snow, mud, cobbles etc.). If unavoidable, proceed with extreme caution.
-  If the critical service indicator is activated and cannot be reset (see Section 4.1 *Critical Service Indicator*), stop using the device as soon as is practicable and contact your practitioner to arrange a service.
-  You must not adjust or tamper with the setup of the device.
-  Do not modify or replace the KAFO straps or padding prescribed by the practitioner.
-  After continuous use the knee module may become hot to the touch.
-  To minimize the risk of slipping and tripping, appropriate footwear that fits securely around the foot components must be used at all times.
-  Carrying loads might affect your posture and ability to meet the required parameters for the knee to release from stance.
-  Keep the key fob on a lanyard separate from any other keys to prevent accidental mode switching.
-  To prevent damage to clothing take care not to trap clothing in the moving parts of the device.
-  Avoid any strangulation hazard that the key fob lanyard may present to the user when worn, such as catching the cord in rotating machinery.
-  When the key fob lanyard is not in use always store it away safely to avoid any strangulation hazard that it may present to children.
-  The device is not designed for walking backwards. Do not attempt to walk backwards as the device may not support you.

In *Walk* mode, when backwards motion is detected, the device will lock in extension to provide standing support only. See Section 9.4 *Activities and Associated User Modes* for details.
-  Use of accessories, transducers and cables other than those specified or provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation.
-  **WARNING:** Portable RF (radio frequency) communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the device, including cables specified by the manufacturer; this may otherwise result in the degradation of performance of the device.

3 Component Identification

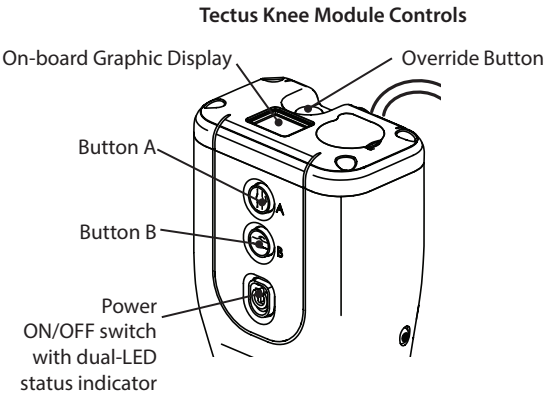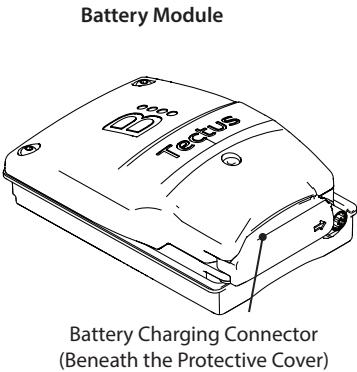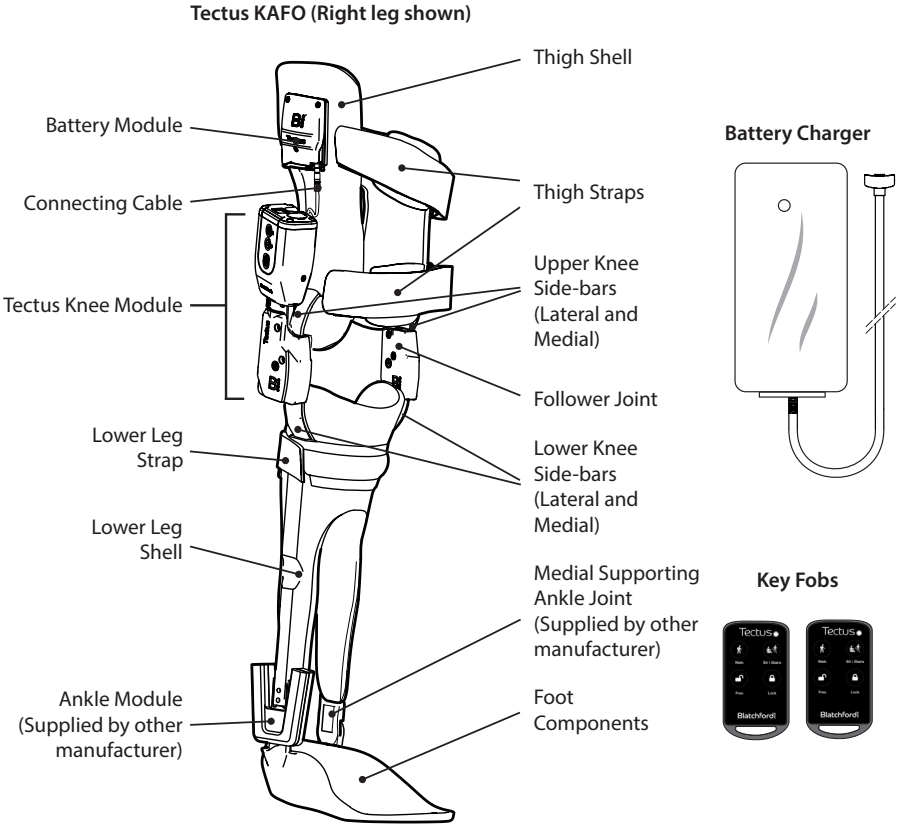

Note... For illustrative purposes, only the right leg Tectus KAFO is shown.

4 Maintenance

Your Practitioner is responsible for carrying out periodic inspections of the device and will arrange these with you.

Do not carry out maintenance on this device yourself. Instead, return it to your practitioner/ service provider for maintenance. If the device is still under warranty, we will loan you another knee unit while we carry out maintenance. The loan device and the device returned after maintenance must be set up by the practitioner before use.

Any changes in performance of this device must be reported to the practitioner.

Changes in performance may include:

- Increase or decrease in knee stiffness
- Instability
- Reduced knee support (free movement)
- Any unrecognized beeps, warning lights, on-screen indications or device vibrations*
- Any unusual noise

*The device emits vibrations when operating modes change. This is normal behavior.



Do not lubricate the device yourself, this will be carried out during servicing with the appropriate lubricants.



Never use WD40 or any other water dispersant on any of the device moving parts in an attempt to fix unusual noises, squeaking or stiff joints.

Check the device every time before use for physical damage to the KAFO and:

- Signs of wear or tear
- Hydraulic leakage
- Security of the joint covers
- Security and condition of the straps


Replace the key fob battery either every six months or:

- If the key fob mode selection buttons stop functioning correctly, or
- if the key fob LED does not illuminate every time a button is pressed

See Section 4.4 **Replacing the Key Fob Battery**. If for any reason you are unable to carry out this procedure contact your practitioner or service provider to arrange replacing your battery for you.

4.1 Critical Service Indicator

In the event of the device detecting a malfunction, the critical service indicator graphic will be activated and flash on the device screen (see image) and the device will attempt go into **Safety** mode with higher than normal knee flexion and extension resistance. Simultaneously button B will start and continue flashing red until the malfunction is resolved.

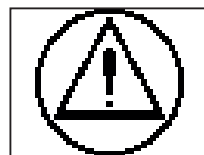

In this **Safety** mode you can slowly extend or flex the knee to allow you to move to a safe position to remove the device.



If for any reason Safety mode does not engage, stop using the device immediately.

If adjustment of the knee angle is required, the device can be allowed to flex or extend freely by operating the override button, please refer to Section 9.9.



WARNING! Only use the override button if it is safe to do so.



If the device malfunctions, and performing a hard reset (see Section 4.2) does not fix the fault, or if the Critical Service Indicator is displayed, contact your practitioner as soon as is possible, and you must not use the device until the malfunction has been fixed and/or service has been carried out as necessary.

The critical service indicator will continuously flash and the knee will remain in this mode until the malfunction is resolved. If you power down with the critical service indicator on, it will extinguish however when you next power on the device the critical service indicator will begin to flash again and continue until the malfunction is resolved.

4.2 Hard Reset

In the case of a minor and non-recurring malfunction a hard reset may be attempted to allow device self-recovery. To conduct a hard reset, power the device OFF and ON via the power ON\ OFF button located on the knee module.



If the malfunction is persistent contact your practitioner.

4.3 Cleaning

Blatchford recommends cleaning the device daily. Use a damp cloth and mild soap to clean outside surfaces, DO NOT use aggressive cleansers or bleach. Do not machine wash/tumble dry or use any hose, pressure washer/drier system.

Ensure water/liquids do not enter the charging socket. Thoroughly dry before use.

4.4 Replacing the Key Fob Battery

The key fob operates using a CR 2032 button battery. Replacement is necessary every six months or when switching between knee modes becomes inconsistent or if the key fob LED does not illuminate every time a button is pressed.

1

A black key fob with a silver key ring. The battery compartment lid is open, revealing the internal battery compartment. The lid has a label with the following text: "PART: F0B03234-4T3-1", "REVISION: 1", "W/O: S-098552/1", and "FCC ID: PAF0BBER001".

Place the key fob on a flat surface with the battery compartment lid facing upwards.

2

Two images showing a cross-head screwdriver being used to remove screws from the battery compartment lid. The first image shows the screwdriver tip touching the screw head. The second image shows the screw being lifted out of the lid.

Using an appropriate cross head screwdriver, remove both screws and put aside for later.

3

A close-up image showing a flat head screwdriver being used to pry open the battery compartment lid from the key ring end. The lid is slightly lifted, revealing the internal battery compartment.

Using an appropriate flat head screwdriver pry open the cover only from the key ring end as shown to prevent damage to the gasket.

4

A close-up image showing the battery compartment lid being removed from the key fob. The lid is shown with the battery compartment open. To the right of the key fob, a CR2032 Lithium Cell 3V battery is shown with a recycling symbol below it.

Remove the discharged battery and dispose it according to the local recycling regulations.

 **Batteries should be kept out of reach of children and pets. In case of ingestion, seek medical attention.**

5

A close-up image showing a hand placing a new CR2032 Lithium Cell 3V battery into the battery compartment. The battery is being pressed against the side contact springs.

With the side marked + facing outwards, place the new battery into the battery compartment by pressing it first against the side contact springs then into the compartment.

6

A close-up image showing the battery compartment and lid being cleaned. A dry cotton bud is being used to clean the mating surfaces of the battery compartment and lid.

Ensure that the mating surfaces of the battery compartment and lid are clean. If required, use a dry cotton bud to clean these surfaces.

7



To ensure continued protection against ingress of moisture, make sure that the lid gasket is fitted without creases and free of damage.

8



Replace cover and screws as shown and tighten screws until hand tight. Do not overtighten!

After battery replacement, confirm all key fob functionality by testing that all buttons achieve the required knee mode change when pressed and that the LED on the fob illuminates once after each time a button has been pressed.

5 Limitations on Use

Lifting Loads

User weight and activity is governed by the stated limits.

The combined user weight and lifting load must not exceed 100 kg in all cases.

Environment

Avoid exposing the Tectus KAFO to corrosive elements such as water, acids and other liquids. Also avoid abrasive environments such as those containing sand for example as these may promote premature wear.

Note... Only the knee module and battery pack are waterproof to IP54 standard.

Exclusively for use between -10 °C and 50 °C
(14 °F to 122 °F).



Suitable for outdoor use

6 Battery Charging

6.1 Battery Charging Safety Information

-  Never connect the charger to the device whilst still wearing it.
-  The battery should only be charged in temperatures between 0 °C to 35 °C (32 °F to 95 °F).
-  The battery charger can be used with electrical outlets rated between 100V and 240V AC, 50/60 Hz.
-  Only charge the battery of the device using the charger and charging cable supplied with the product. Do not use this charger to charge any other device.
-  Ensure the appropriate, country-specific mains adapter plug is fitted to the charger. Never force the plug into an incompatible mains socket.
-  Before charging ensure charging surfaces are dry, free from contamination and debris build-up, because this can prevent charging.
-  If any unusual noise or smell is noticed whilst charging, disconnect the charger and power off both charger and knee module. Report the problem to your practitioner.
-  The battery module and battery charger connectors contain strong magnets. Always keep a safe distance (at least 10 cm) between these magnets and all objects that can be affected by magnetism, such as watches, pacemakers, bank cards or any magnetically stored media.
-  Do not allow any ferrous material to attach itself to the charging surfaces.
-  Do not dismantle the adapter plug or battery charger.
-  Immediately replace damaged adapter plugs or battery chargers with parts supplied by Blatchford.
-  During a charging the device will power down. Once charged, the device will require powering on via the ON/OFF button located on the outer surface of the Tectus knee module.
-  Do not remove the batteries, they are not field replaceable and will be replaced as necessary, during routine inspection.
-  If the device has been subjected to temperatures lower than -10 °C (14 °F) it must be returned to Blatchford for inspection for possible damage to the battery pack.

6.2 Before Charging



The device should not be charged while being worn; remove the Tectus KAFO before charging. Do not don the device while it is connected to the charger.

Always check the battery charge level before use, ensuring a sufficient amount of charge for daily activities. It is recommended to charge the device every day when using it on a daily basis.

It is recommended that you switch the device to **Lock** mode and, before charging, lay the Tectus KAFO down in a horizontal position (on a flat surface or floor), with the knee module facing upwards and with 5 degrees of knee flexion so that it is secure and does not roll over.

Note... As soon as the charger is connected, the knee module automatically switches off.


6.3 On-Screen Battery Level Indicator

6.3.1 Normal Indications

The battery level indicator will appear for 5 seconds on the side of the on-board graphic display:

- During mode switching.
- Long pressing button A and B together.

The following battery level indications are available:

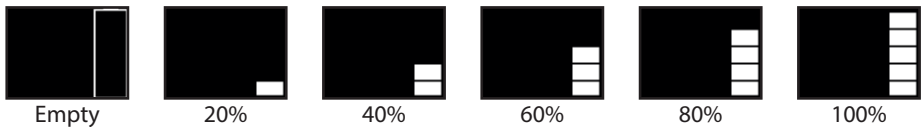

6.3.2 Low Battery Behavior

Low Battery Warning

The device will warn you when the battery charge level shown drops to 20% by emitting two short high-tone beeps and also displaying the warning symbol followed by one bar on the graphic display. This warning will be repeated every 10 minutes and/or when any button is pressed on the device until the charge in the battery reaches the critically low level.



Critically Low Battery Warning

A critically low battery level will be indicated by the warning symbol flashing and one long high-tone beep. The device will revert to a **Safe** mode identical to the one described in Section 4.1 *Critical Service Indicator*.









When the Critically Low Battery warning is indicated, you must stop using the device and not to reuse until the device has been recharged.


6.3.3 No Display after Connecting the Battery Charger

If after connecting and switching on the battery charger the device graphic display remains blank, the battery may be completely discharged. Leave the battery charger connected for at least 15 minutes and check the charge level by disconnecting and re-connecting the battery charger.

6.4 Connecting and Disconnecting the Charger

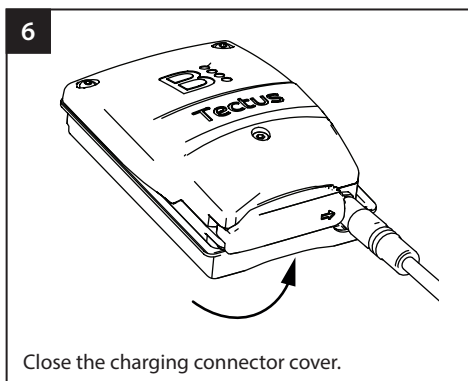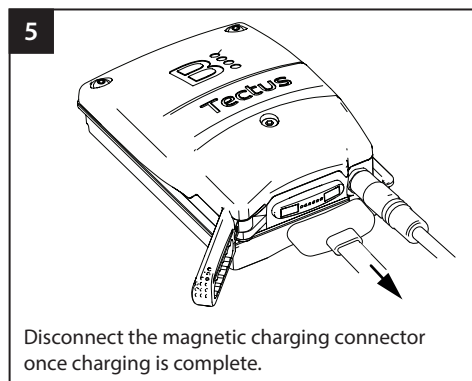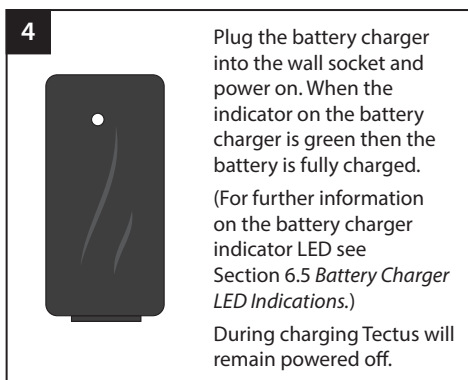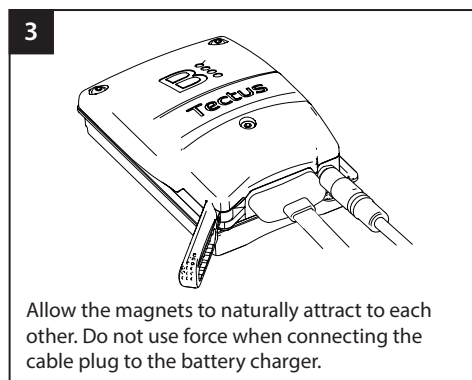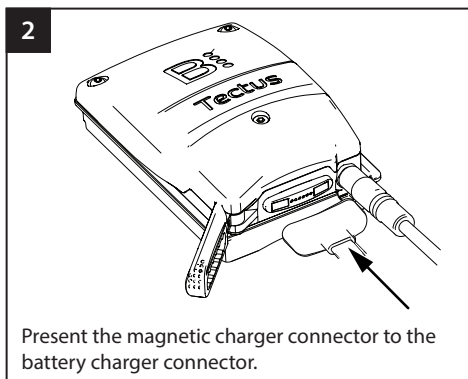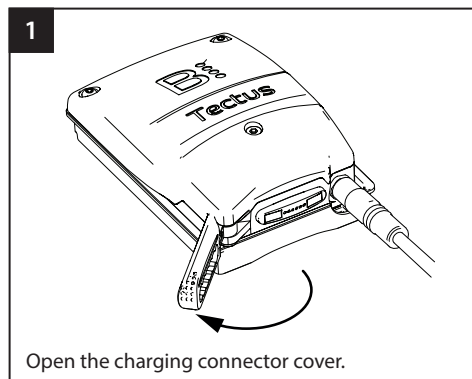

6.5 Battery Charger LED Indications

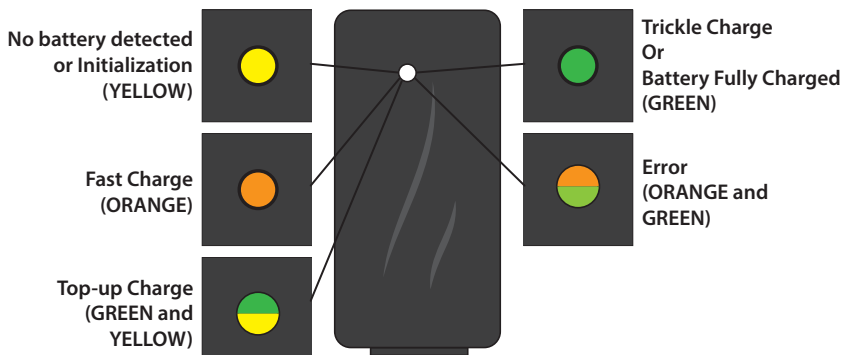


Note... Refer to the reverse side of the battery charger module and the instructions supplied with the charger for further information.



Start-Up Sequence

With the charger plugged into the mains socket, and connected to the device, switch on at the socket. The charger LED will illuminate in the following color sequence in approximately 10 seconds to indicate the device is charging.

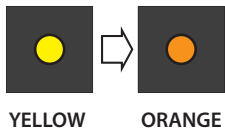

6.6 Charging and Operating Reference Times

Process	Time
Time to fully charge battery. (From fully discharged state.)	Approximately 2 hours
Minimum charging time before use. (From fully discharged state.)	At least 1 hour
Maximum battery duration, from fully charged, under continuous device operation i.e. uninterrupted walking. (Subject to operating temperatures)	18 hours (see notes i and ii)

- Notes:
- i) For the maximum operating time with one battery charge, turning the device off when it is not being used is recommended.
 - ii) The operating time of the device may be reduced at low ambient temperatures or due to aging of the battery.

7 How to Don and Doff the Tectus KAFO

7.1 Donning the Tectus KAFO

Notes: i) Charge the device before donning. (See Section 6 **Battery Charging**.)
ii) Inspect daily for signs of deterioration or damage that might affect the safety or function of the device. If anything unusual is noticed, contact your practitioner for advice.

1. Completely undo and fully open all closure straps so they are clear of the shell openings.
2. Remove the shoe.
3. Sit on the front edge of a chair.
4. Power ON the device. (See Section 8.)
5. If powered ON with the device lying horizontal, the device should be in **Free** mode after power ON; if not, then set the device to **Free** mode via key fob or module buttons.
6. Flex the Tectus KAFO at the knee.
7. Slightly extend the leg and insert the thigh into the thigh shell.
8. Insert the foot into the foot component, positioning the heel first and insert the lower leg into the lower leg shell.
9. Fasten all straps. Do not overtighten.
10. Check the fit of the orthosis for comfort. (Alter as required e.g. appropriate trim lines.)
11. Put the shoe on over the foot component. (Some users may prefer donning the Tectus KAFO with the shoe already in place.)
12. Set the device to **Walk** mode and stand up (holding on to chair for support as necessary) and adjust all closures/securing straps as required.
13. If worn over clothing, ensure clothing is folded neatly to avoid discomfort.
If worn under clothing (i.e. dress, skirt, loosely fitting trousers), a sock or a thin under garment covering the full length of the leg should be worn.



To prevent damage to clothing take care not to trap clothing between the moving parts of the device.

14. Set the device to **Sit** mode and sit down again carefully.
15. Set the device to **Free** mode and gently flex and extend the knee to confirm that Tectus KAFO fits comfortably throughout the range of movement.
16. Set the device back to **Walk** mode before standing up.

7.2 Doffing the Tectus KAFO

1. Set the device to **Sit** mode.
2. Sit down on the front half of a chair (holding on to chair for support as necessary).
3. Set the device to **Free** mode.
4. Remove the shoe.
5. Open all fastening straps.
6. Remove Tectus KAFO.
7. Extend the Tectus KAFO to 5 degrees knee flexion and activate **Lock** mode on the device.
8. Power OFF the device.
9. Lay the Tectus KAFO down in a horizontal position (on a flat surface or floor), with the knee module facing upwards and with 5 degrees of knee flexion so that it is secure and does not roll over.

Note... It is recommended to put the device on charge every time after use.



Regularly check the limb on which the Tectus KAFO is worn for signs of skin irritation, tissue damage, pressure sores or discomfort and report any such signs to your practitioner.

8 Turning the Device ON/OFF

The device is powered on or off via the Power ON/OFF switch on the device (see Section 3); there is no Power ON/OFF switch on the key fob.

Powering ON

To power on the device, press and hold the ON/OFF switch until LED illuminates green. Short beeps and vibrations will then occur during the start-up sequence; when they finish, then release.



Powering OFF

To initiate the shut-down sequence, press and hold the ON/OFF switch until two short beeps with two short vibrations are emitted, then release.




Start-up Sequence

Powering ON initiates the automatic start-up sequence during which the LED and graphic display indications change, audible beeps sound and the device vibrates as shown. The sequence lasts for approximately 4 seconds.

 **Do not use the device if the BLUE LED continues flashing during, and on completion of, the start-up sequence. This indicates the programming of the device has not been previously completed. Contact your practitioner before using the device.**

The device is powered ON and ready for use when the default **Free/Walk** mode (depending on device orientation during start-up) is displayed on the on-board graphic display, (see sequence shown on right).

Note... The display goes into sleep mode (display goes blank) after 5 seconds of inactivity but is reactivated after every user mode change initiated by either buttons A/B on the device, or buttons on the key fob.

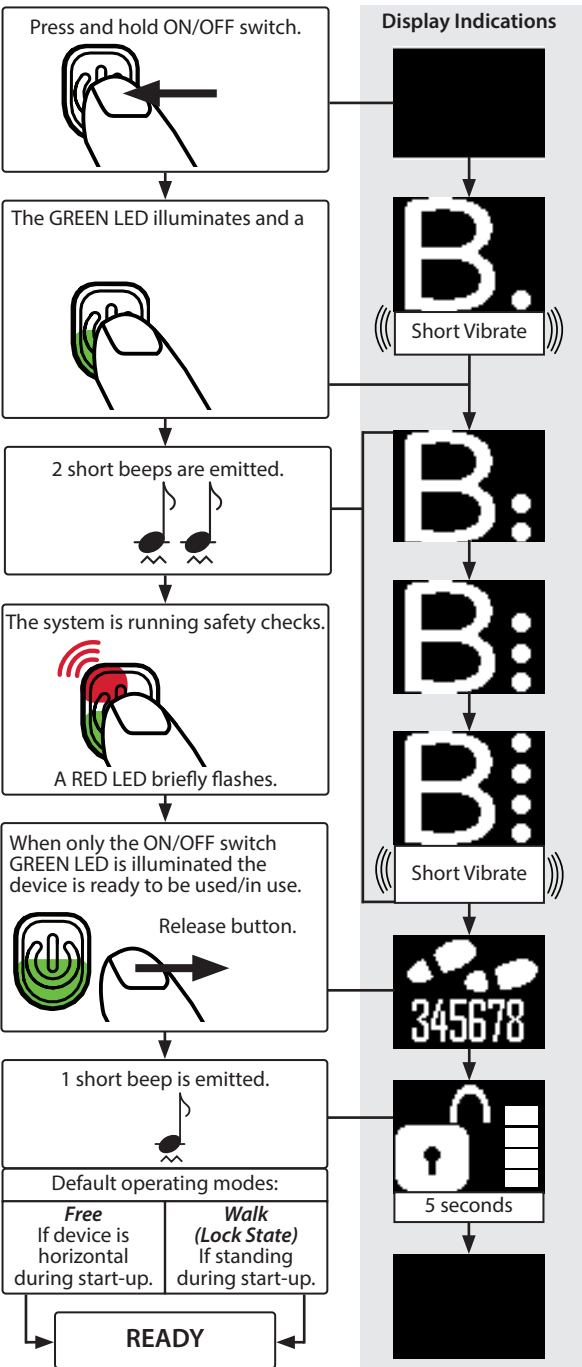

9 Tectus Knee Module Operation

9.1 User Modes

The device has the following user-selectable operating modes:

- *Walk*
- *Sit*
- *Stairs*
- *Lock*
- *Free*
- *Silent*

The device may enter automatically the following modes:

- *Critical Service*
- *Safe*

The device has the following practitioner-only selectable operating mode:

- *Training*

9.2 Safety While Switching Between User Modes


9.2.1 Default User Mode

The device after start-up, by default, switches to **Free** mode if the user is seated or **Lock** state of **Walk** mode if the user is standing. During start-up **Free** mode is only intended to be used for donning the device. Another mode (typically **Walk** mode) should be selected before standing after donning the device.


9.2.2 Safety Restrictions to User Mode Switching

The device will not allow switching to **Free** mode when the user is walking, descending stairs or standing with the knee locked. This is for safety reasons as the consequent sudden loss of support poses a considerable risk of falling. Therefore the following mode switching combinations will not be executed by the device:


Walk mode to *Free* mode

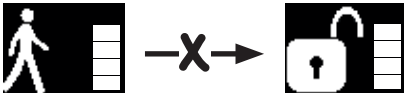


Stairs mode to *Sit* mode

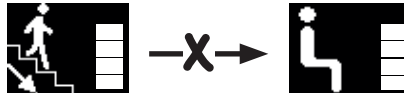

Stairs mode to *Free* mode

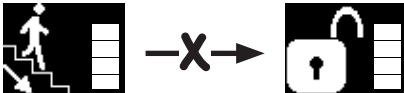

Sit mode to *Stairs* mode

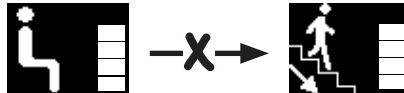

Lock mode to *Free* mode



Free mode to *Stairs* mode



9.3 Device Over-Stress Warning


Very rarely, and under special circumstances, the device may emit a rapid beeping audio and vibration alarm, for up to 15 seconds. This indicates the device is over-stressed, through not being used as intended, or due to an internal fault.

When Stress Warning Occurs

If you take (or the device itself takes) successful remedial action to remove the over-stress condition before the end of the 15 seconds alarm period, then the alarms stop and the device resumes normal operation.



If you do not (or the device itself does not) take successful remedial action to remove the over-stress condition before the end of the 15 seconds alarm period, then the device interprets this as a fault situation and switches automatically to **Safety** mode.

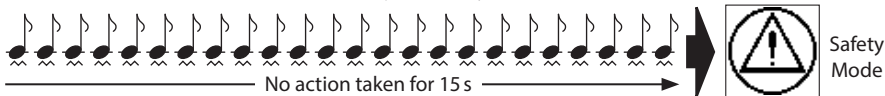



Occurrence and Avoidance of Over-stressing the Device

The following table summarizes the scenarios in which the device might be over-stressed and the possible remedial actions.

Alarm Occurrence	Reason	Remedial Action
During Mode Switching	You may have attempted to change between user modes when the previous activity had not been fully completed and the hydraulic system was not ready to adjust to the new settings.	Try to reduce the load on the device until it can execute the mode switching command. The rapid beeping should stop immediately to indicate that normal operation has been resumed. Always allow sufficient time for the device to respond to mode switching commands.
During Sitting Down	During the process of sitting down the device automatically switches to a lower resistance after about a 45° of movement. If you attempt to sit down too quickly and forcefully, it over-stresses the hydraulic system during mode switching.	Try to reduce the load on the device until it is able to switch to Free mode. Follow your practitioner's advice on the correct way and speed of sitting down while wearing the device.
In Case of a Malfunction	If the remedial action does not fix the problem within the 15 seconds alarm period at the end of this period, the device will assume there is a malfunction and revert to Safety mode and the critical service indicator will appear on the device screen.	Please refer to Section 4.1 Critical Service Indicator on how to deal with a malfunction and for the description of Safety mode

9.4 Activities and Associated User Modes

Activity	Mode Activated and Displayed	Function and Procedure Guidance
Walking 	Walk 	Automatically provides support during stance and release during swing. Although not microprocessor controlled, knee extension assist is always active.
Standing 	Walk  Lock 	If you stand still while in Walk mode, you will be supported. From standing, the device will be alert to any movement, such as a forward or backward step and provide support accordingly. To provide appropriate support, using Lock mode is recommended when standing for an extended period of time (e.g., queueing) or in an environment where your balance can be compromised (e.g., standing in a crowd). Note... Lock mode is a fixed mode, and the device does not monitor for movement. Lock mode needs to be set and released manually.
Backstep 	Walk 	If you step backwards or lean backwards while in Walk mode, the device goes into a locked state called Backstep. This gives you support while you rebalance. Note... Backstep is a state within Walk mode and is not the same as the user-selectable Lock mode. If Training mode is enabled, the device indicates it has gone into this Backstep state by emitting 1 long high-tone beep and 1 vibration. The device reverts to standing Lock state only after you have returned to and remained in the standing position for at least 2 seconds. If Training mode is enabled, this is indicated by the device emitting two beeps and vibrations.
Lock 	Lock 	Knee locked against flexion but free to extend until maximum extension is achieved. Lock mode will remain active until another mode is selected or until the mechanical override button is pressed.
Free 	Free 	The device provides minimal resistance in flexion and minimum amount extension assist resistance in extension. Free mode will remain active until another mode is selected.  This mode does not provide sufficient support for standing.

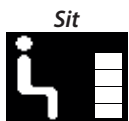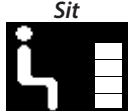Activity	Mode Activated and Displayed	Function and Procedure Guidance
Stand-to-Sit 		Fixed resistance at knee to provide support while moving to seated position, the geometry of the module provides deep yield functionality. To sit, you must manually activate Sit mode via mode switching buttons on the device or on the key fob. Be aware of the surroundings before sitting down. Load both legs equally when sitting down. Bend forward at the waist, push buttocks rearward, place hands on armrests (if available) and bend the legs, sitting down in a smooth motion.
Sitting 	 	In Sit mode after 2 seconds of achieving a resting position the device automatically switches to Free mode to allow, if necessary, adjustment of limb position while sitting. Note... The device will start up in this Free mode when start-up is initiated while you are in a seated position. While in Sit mode the device will detect when you attempt to stand and locks against flexion as you rise, so you cannot sit back down again until either the leg is fully extended or the override button is pressed.
Sit-to-Walk 		When in Sit mode the device detects when you attempt to stand up and start walking and enters into Walk mode automatically. To stand up, the feet should be placed evenly, move the trunk forward and stand up with the support of your arms. Try to load weight through the orthosis and begin walking. ⚠ If you do not complete the motion and attempt to sit back down again the device will lock against flexion.
Stairs Ascent 		⚠ For safety, switch manually to Lock mode before starting to ascend stairs. ⚠ Where possible, handrails must always be used. When Lock mode is used the knee will not yield (although it can extend), so a “step-to” gait should be used leading with the sound limb going up stairs.

Activity	Mode Activated and Displayed	Function and Procedure Guidance
Stairs Descent 	<i>Stairs</i>  <i>Lock</i> 	⚠ In <i>Stairs</i> mode, do not attempt to descend stairs using leg-over-leg gait until you have had adequate physiotherapy and completed supervised training signed off by your practitioner! ⚠ Always approach stairs with caution and be aware of your surroundings. ⚠ Where possible, handrails must always be used. ⚠ For stairs decent, either <i>Stairs</i> mode or <i>Lock</i> mode must be enabled before starting descent and once selected, you must not change it to another mode until the stairs decent is complete. <i>Stairs</i> mode provides appropriate support for leg-over-leg descent with programmed flexion resistance combined with appropriate extension bias. Note... Place only the posterior half of the foot on the step then load orthosis and push it in to knee flexion, step down with the sound limb and allow knee flexion on the orthotic limb. When <i>Lock</i> mode is used the knee will not yield, it is locked in full extension, so a “step-to” gait should be used, leading with the locked fitted limb going down the stairs.
Entering Vehicle 	<i>Sit</i> 	⚠ Always approach vehicles with caution and be aware of your surroundings. To sit into the vehicle, you should activate <i>Sit</i> mode. The device will enter <i>Free State of Sit</i> mode when the thigh is horizontal. (Not identical to <i>Free</i> mode.) This allows you to manoeuvre the limb into a comfortable and safe position. Note... If the thigh angle is not horizontal e.g., due to the angle of the vehicle seating surface, then the device will enter <i>Sit-to-Stand State of Sit</i> mode and can only be positioned by using the mechanical override button.
Exiting Vehicle 	<i>Sit</i> 	Before exiting the vehicle make sure the device is in <i>Sit</i> mode so that when you exit the vehicle you are supported as you move from sitting to standing and is ready to switch automatically to <i>Walk</i> mode.

Activity	Mode Activated and Displayed	Function and Procedure Guidance
Driving 	<i>Free</i> 	⚠ You must not operate the device controls or key fob while driving. ⚠ Warnings in this document and any national guidance must be followed when considering driving while wearing a Tectus KAFO. ⚠ Only the unaffected leg may be used to operate controls of a car. For driving, the device should be manually switched to <i>Free</i> mode via the key fob or the device buttons.
Safe Mode		The device will revert into <i>Safe</i> mode every time a malfunction or critically low battery level is detected, or when the service mode warning period has expired. In <i>Safe</i> mode the device will switch to high yielding knee flexion resistance. See Section 4.1 <i>Critical Service Indicator</i> and Section 6.3.2 <i>Low Battery Behavior</i> for more details.
Critical Service		
Training	<i>Training</i>	Note... Training mode can only be enabled through practitioner (clinician) level access to the app. In <i>Training</i> mode, aural and vibrational cues are provided to indicate when an operating state change within <i>Walk</i> mode has been made to help you learn how to use the device. For example, when you make the appropriate first step movement from stationary to activate <i>Backwards Walk</i> state, the device emits one long beep and vibrates to confirm <i>Backwards Walk</i> state has been selected. Similarly, if you stop walking to stand still, the device emits two short beeps and vibrates to confirm <i>Lock</i> state has been selected.

9.5 Operating Actions and Device Indications

Device and Key Fob Button Operation

The device is manually operated by pressing either buttons A and/or B on the device, or by pressing buttons on one of the key fobs. The button or button combination pressed, together with the hold duration (Short, Long or Very Long) of the press determines which operation is selected.

Note... Key fob buttons have only two options; Short or Long press.

To help the user distinguish between the three different press durations, for each press duration the device emits a corresponding unique pattern of beeps and vibrations, and displays a corresponding icon on the screen, as shown in the following table:

Name	Duration	Timing Beeps with Vibrations	On-screen Icon	Symbol Used in Document
Short Press	Max. 2 seconds			
Long Press	2-4 seconds			
Very Long Press	Longer than 4 seconds			


Device Indications

The device will acknowledge that the requested operation, e.g. change of mode, has been registered by the device by emitting audible and/or vibrational cues as shown in the following table:

Type of Indication		Symbol Used in Document	
Audible (Beep)		Short	Long
	High Tone		
	Medium Tone		
	Low Tone		
Vibration			
On Screen		See detailed description in Section 9.4, 9.6 and 9.7.	
ON/OFF Switch LED Light		See detailed description in Section 8.	

9.6 Mode Switching on the Device Using Tectus Module Buttons A and/or B


Once start-up routine has successfully completed, the device can be controlled with button combinations on the Tectus Knee Module or Key Fob.

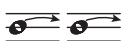Modes	Initiation (On Device)	Timing Aid		Device Response		
		On Screen	Beep & Vibrate	Beep Signal	Vibrate Signal	Displayed Symbol
<i>Walk</i>	Short Press button A 		1 	2xLow tone short 	2xShort 	
<i>Sit</i>	Long Press button B 		1+2  	1xMedium tone short 	1xShort 	
<i>Stairs</i>	Short Press button B 		1 	2xMedium tone short 	2xShort 	
<i>Free</i>	Short Press button A&B 		1 	1xMedium tone long 	1xLong 	
<i>Lock</i>	Long Press button A 		1+2  	2xMedium tone long 	2xLong 	
<i>Silent</i>	Very Long Press button A 		1+2+3   	2xMedium tone short 	2xShort 	

Note... Do not press button B for more than 4 seconds or you may accidentally switch on **Bluetooth®** as indicated by the power button illuminating flashing blue and steady green and emitting three low tones and vibrations. This is not a user function and must be switched off. To do this, power off the device and power on again using the ON/OFF switch (see Section 8), or press button B for longer than 4 seconds.



9.7 Mode Switching on the Device Using The Key Fob

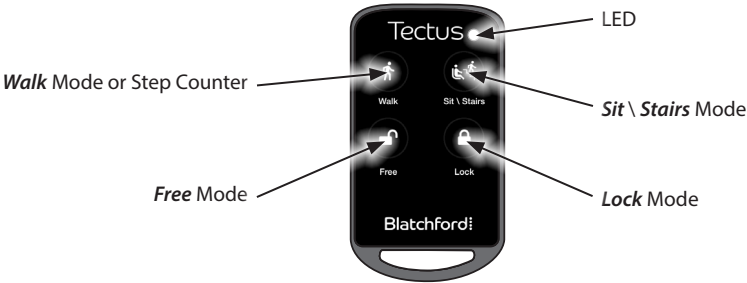

Modes	Initiation (On Fob)	Timing Aid		Device Response		
		On Screen	Beep & Vibrate	Beep Signal	Vibrate Signal	Displayed Symbol
Walk	Short Press Walk button			2xLow tone short 	2xShort 	
Sit	Short Press Sit \ Stairs Button			1xMed. tone short 	1xShort 	
Stairs	Long Press Sit \ Stairs Button		1+2 	2xMed. tone short 	2xShort 	
Free	Short Press Free button			1xMed. tone long 	1xLong 	
Lock	Short Press Lock button			2xMed. tone short 	2xShort 	

9.8 Additional Key Fob Functions

Modes	Initiation (On Fob)	Timing Aid		Device Response		
		On Screen	Beep & Vibrate	Beep Signal	Vibrate Signal	Displayed Symbol
Step Counter	Long Press Walk button		1+2 	-	-	
Connection Code	Long Press Lock Button		1+2 	-	-	

9.9 Mechanical Override Operation

The knee can be flexed in any mode by pressing the manual override button located on the top surface of the control module. The button must be pressed and held down fully until the desired knee flexion angle has been achieved.



Do not use any object (e.g. screwdriver, pen) to press the override button.




This operation should only be used in exceptional circumstances (e.g. device malfunction, battery depletion).

Once the manual override button is released the knee flexion reverts to the same resistance it had before the manual override button was pressed.

Note... The hydraulic module has been designed to always permit free leg extension.



Be aware of finger trap hazard at all times when flexing the device.

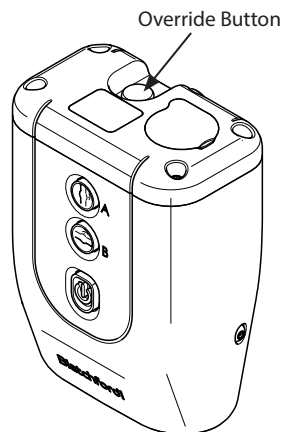

10 Transport and Storage

Transport

1. For transport purposes the unit must be switched off, and packed securely so that
 - a) it cannot be inadvertently switched on and become operative while in transit,
 - b) the Tectus KAFO/device is thoroughly protected from damage in transit.
2. Before shipping Tectus should be put into Lock mode in an extended position. The Tectus KAFO should be placed into its own limb bag (when available) and securely packaged in a suitable box.
3. Contact Blatchford prior to sending your Tectus KAFO if any obvious physical damage has occurred to the battery pack.

Storage

1. It is recommended to store the device upright with the device put into **Lock** mode before switching off.
2. If the Tectus KAFO is to be stored upright then secure the device to prevent it falling over.

Manufacturer's Declarations and Legal Information

FCC Compliance Statement



This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note... Contains pre-approved **Bluetooth®** module: FCC ID: QQQ-GM220P IC: 5123A-GM220P.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation. This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Responsible party: Blatchford Inc.

1031 Byers Road, Miamisburg, OH 45342

800-548-3534 (toll free) | 937-291-3636

customerservice@blatchfordus.com

RSS Compliance Statement

This device complies with RSS 210 of ISED Canada.

Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause interference, and
2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

L' utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes:

1. il ne doit pas produire d'interférence et
2. l' utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter toute interférence radioélectrique reçu, même si celle-ci est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's website Blatchford Inc. 1031 Byers Road, Miamisburg, OH 45342.

800-548-3534 (toll free) | 937-291-3636 customerservice@blatchfordus.com

Liability

The manufacturer recommends using the device only under the specified conditions and for the intended purposes. The device must be maintained according to the instructions for use supplied with the device. The manufacturer is not liable for any adverse outcome caused by any component combinations that were not authorized by them.

CE Conformity

This product meets the requirements of the European Regulation EU 2017/745 for medical devices. This product has been classified as a class I device according to the classification rules outlined in Annex VIII of the regulation. The EU declaration of conformity certificate is available at the following internet address: www.blatchfordmobility.com



Medical Device



Single Patient – multiple use

Warranty

This device is warranted for 36 months.

A routine inspection of the device is required after 2 weeks, 3 months, 6 months, 12 months and 24 months.

The user should be aware that changes or modifications not expressly approved could void the warranty, operating licenses and exemptions.

The above may vary by market; consult your local representative for details.

See the Blatchford website for the current full warranty statement.

Reporting of Serious Incidents

In the unlikely event of a serious incident occurring in relation to this device it should be reported to the manufacturer and your national competent authority.

Environmental Aspects



This symbol indicates that the product contains electrical/electronic components and/or batteries that should not be disposed of in general waste or be incinerated at the end of the product's life.



At the end of the product's life, all electrical/electronic components and/or batteries should be recycled or disposed of in accordance with the current regulations for the handling of WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), or equivalent local regulations. The remainder of the product should also be recycled where possible in accordance with local waste recycling regulations.

To help prevent potential harm to the environment or to human health from uncontrolled waste disposal, Blatchford offers a take-back service. Please contact Customer Services for details.

Trademark Acknowledgements

Tectus and Blatchford are registered trademarks of Blatchford Products Limited.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG Inc., and any use of such marks by Blatchford is under License. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Innhold.....	30
1 Beskrivelse og tiltenkt formål	31
2 Sikkerhetsinformasjon.....	32
3 Komponentidentifisering.....	34
4 Vedlikehold.....	35
4.1 Varsel om kritisk vedlikehold	36
4.2 Kald omstart.....	36
4.3 Rengjøring.....	36
4.4 Bytte batteri i fjernkontrollen	37
5 Bruksbegrensninger.....	38
6 Lading av batteri.....	39
6.1 Informasjon om sikkerhet ved lading av batteri.....	39
6.2 Før lading	40
6.3 Batterinivåindikator på skjermen	40
6.4 Koble til og koble fra laderen.....	41
6.5 LED-lys på batteriladeren	42
6.6 Referansetider for lading og bruk	42
7 Slik tas Tectus KAFO-en av og på.....	43
7.1 Slik tas Tectus KAFO-en på.....	43
8 Slå enheten AV/PÅ.....	44
7.2 Slik tas Tectus KAFO-en av	44
9 Bruk av Tectus-knemodulen.....	46
9.1 Brukermoduser	46
9.2 Sikkerhet ved bytte av modus.....	46
9.3 Varsel om overbelastning på enheten	47
9.4 Aktiviteter og tilknyttede moduser	48
9.5 Handlinger og enhetsindikasjoner	52
9.6 Modusbytte på enheten med A- og B-knappene på Tectus-modulen.....	53
9.7 Modusbytte på enheten med fjernkontrollen.....	54
9.8 Flere fjernkontrollfunksjoner	54
9.9 Mekanisk overstyring.....	55
10 Transport og oppbevaring.....	55
Produsentens erklæringer og juridisk informasjon	56



Les alle sikkerhetsmerknadene i avsnitt 2 og 6 før du bruker enheten.

1 Beskrivelse og tiltenkt formål

Denne bruksanvisningen er ment kun for brukeren.

Ordet *enhet* i denne bruksanvisningen viser til Tectus.

Merk... Tectus er et knesystem som består av Tectus-knemodulen, batteripakken og andre Blatchford-deler som utgjør skinnen, eller KAFO-en (kne-ankel-fot-ortose). Ankelleddet er ikke laget av Blatchford og er derfor ikke beskrevet i denne bruksanvisningen. Se dokumentasjonen fra produsenten av ankelen.

Forsikre deg om at du forstår alle bruksanvisningene, spesielt avsnittene om vedlikehold og sikkerhetsinformasjon.

Bruksområde

Denne enheten skal utelukkende brukes som en del av en protese for underekstremiteter.

Skal kun brukes av én person.

Den mikroprosessor kontrollerte enheten konfigureres til ditt ganglag av legen, og tilpasser seg bevegelsene dine i sanntid, slik at du kan gå, stå, sette deg og gå ned trapper.

Du kan kontrollere enheten manuelt ved å bytte mellom forskjellige moduser som passer til aktiviteten du skal gjøre, med A- og B-moduskontrollknappene på enheten og/eller kontrollknappene på fjernkontrollen. Legen kan bruke disse kontrollene sammen med Blatchford-appen når hen skal tilpasse enheten til deg.

Enheten har en mekanisk overstyringsknapp som, når den trykkes inn, lar kneet flektre.

Hvis elektronikken eller det hydrauliske kontrollsystemet svikter, eller når batteriet er helt utladet, bytter enheten automatisk til sikkerhetsmodus. I sikkerhetsmodus går enheten tilbake til motstandsparameterne den hadde før programmeringen og har begrenset funksjonalitet.

Normal drift gjenopptas når enheten slås på etter at feilen er rettet eller batteriet er ladet opp.

Se avsnitt 4.1 *Varsel om kritisk vedlikehold* og avsnitt 6.3.2 *Atferd ved lavt batterinivå*.

2 Sikkerhetsinformasjon



Dette advarselssymbolet fremhever viktig sikkerhetsinformasjon som må følges nøye.



Ta kontakt med legen hvis tilstanden din endrer seg.



Se jevnlig etter tegn på hudirritasjon, vevskade, trykksår eller ubehag på lemmet Tectus KAFO-en brukes på, og rapporter slike tegn til legen.



Montering, programmering, vedlikehold og reparasjon av enheten (inkludert håndtering og bytte av batterienhet) må bare utføres av en kvalifisert lege eller tekniker som har deltatt på et godkjent opplæringskurs.



Pass alltid på så så fingrene ikke kommer i klem.



Ikke plasser den nær en varmekilde. Ikke forlat den i direkte sollys eller inni en bil når det er varmt vær.



Unngå sterke magnetfelt, radioaktivitet, kilder til elektrisk interferens, miljøer som inneholder væsker og/eller pulver.



Enheten skal ikke brukes når det tas skanninger (f.eks. røntgen, CT eller MR).



Enheten er ikke egnet til bruk i vann eller som dusjortose. Hvis ortosen kommer i kontakt med vann, må den tas av og tørkes umiddelbart.



Store endringer i hæl høyde etter at enheten er programmert, vil ha negativ innvirkning på funksjonen til ortosen. Alt fottøy som skal brukes med ortosen, må godkjennes av lege.



Si fra til legen hvis du har pacemaker eller annet elektronisk medisinsk utstyr før du bruker denne enheten.



Pass på at det ikke kommer vann inn i ladekontakten, og at dekslet kun tas av ved lading.



Mer sikkerhetsinformasjon finnes i avsnitt 6.1 *Informasjon om sikkerhet ved lading av batteri*.

Husk på følgende advarsler når du bruker enheten:



Eventuelle endringer i ytelsen eller funksjonen til enheten, f.eks. begrenset bevegelse, ujevn bevegelse eller uvanlige lyder, skal umiddelbart rapporteres til legen eller tjenesteleverandøren.



Forsikre deg om at bare kjøretøyer med passende ettermontering brukes når du kjører. Alle personer må overholde gjeldende vegtrafikklover når de bruker motorvogner. Benet som ortosen sitter på, må ikke brukes til å styre kjøretøyet (f.eks. clutch-pedal, bremsepedal, gasspedal).



Du må ikke kjøre store maskiner mens du har på deg enheten.



Hold alltid i et rekkverk når du går opp og ned trapper og når som helst ellers hvis det er tilgjengelig.




Når du går ned trapper, skal du kun forsøke å sette et ben foran det andre hvis du har fått opplæring i det og legen har sagt du kan gjøre det. Ellers må brukeren gå med en «sett foten inntil»-bevegelse når hen går ned trapper.


-  Når du begynner å gå, skal du alltid begynne med det friske benet. Hvis brukeren begynner å gå med ortosen først, kan det hende enheten ikke gjenkjenner bevegelsen, og den bytter da til *låsmodus* som et sikkerhetstiltak.
-  Brukeren må sjekke at *trappemodus* er aktivert før hen forsøker å gå ned trapper.
-  Brukeren må sjekke at *sittemodus* er aktivert før hen forsøker å sette seg ned.
-  Enheten skal ikke brukes til uvanlige aktiviteter, deriblant ekstremsport (friklatring, fallskjermhopping, paragliding osv.), sport som omfatter hopping, plutselige bevegelser eller raske skrittsekvenser (f.eks. løping, sykkeløp, basketball, badminton, vintersport) eller ekstreme bakker og trinn.
-  Brukeren bør om mulig unngå å gå med enheten på glatte, ujevne eller myke underlag (sand, snø, gjørme, brostein osv.). Brukeren må være svært forsiktig om det ikke er mulig å unngå disse.
-  Hvis varselet om kritisk vedlikehold aktiveres og ikke kan tilbakestilles (se avsnitt 4.1 *Varsel om kritisk vedlikehold*), må du slutte å bruke enheten så snart som praktisk mulig og ta kontakt med legen for å avtale vedlikehold.
-  Du må ikke tukle med eller endre noe på enheten.
-  Brukeren må ikke endre eller bytte ut stroppene eller polstringen på KAFO-en som er foreskrevet av legen.
-  Knemodulen kan etter kontinuerlig bruk bli varm ved berøring.
-  For å redusere risikoen for å gli og snuble må egnet fottøy som passer godt på fotdelen, brukes til enhver tid.
-  Hvis du bærer last, kan dette påvirke holdningen din og evnen til å overholde de nødvendige parameterne for at kneet skal frigis fra stillingen.
-  Ha fjernkontrollen på en egen stropp og unna andre nøkler, slik at den ikke bytter modus ved et uhell.
-  Pass på at klær ikke setter seg fast i de bevegelige delene til enheten.
-  Brukeren må passe på at stroppen til fjernkontrollen ikke utgjør noen kvelningsfare, f.eks. hvis den setter seg fast i roterende maskineri.
-  Når fjernkontrollsnoren ikke er i bruk, må den oppbevares på et trygt sted for å unngå kvelningsfare for barn.
-  Enheten er ikke laget for å kunne gå baklengs. Brukeren må ikke forsøke å gå bakover, da det ikke er sikkert enheten kan støtte hen.
- I *gåmodus*, når enheten registrerer bevegelse bakover, låser den seg i ekstensjon for å gi ståstøtte. Se avsnitt 9.4 *Aktiviteter og tilknyttede moduser* for mer informasjon.
-  Bruk av andre tilbehør, transdusere og ledninger enn dem som er spesifisert eller levert av produsenten av utstyret, kan føre til at utstyret får økt elektromagnetisk utslipp eller redusert elektromagnetisk immunitet, som igjen kan føre til at det ikke fungerer som det skal.
-  **ADVARSEL:** Bærbart RF-kommunikasjonsutstyr (radiofrekvens) (inkludert eksterne enheter som antennekabler og eksterne antenner) skal ikke brukes nærmere enn 30 cm fra noen del av enheten, inkludert ledninger spesifisert av produsenten, da det kan føre til at enheten ikke fungerer som den skal.

3 Komponentidentifisering

Tectus KAFO (høyre ben vises her)

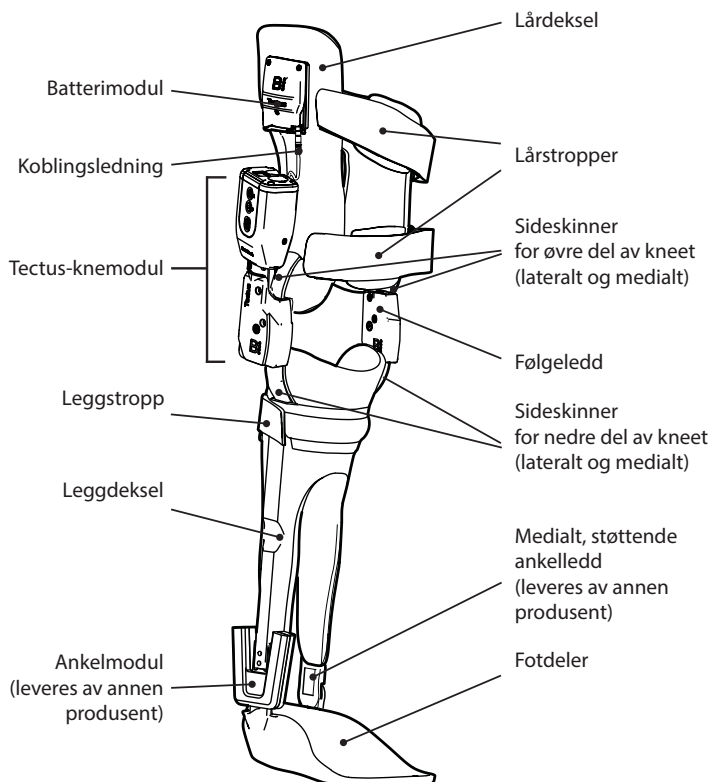


Batterilader

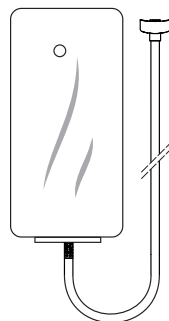

Key Fobs




Batterimodul

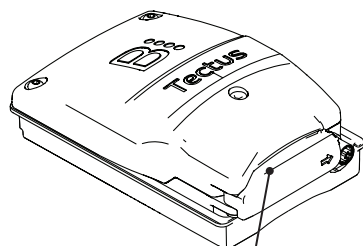

Ladekontakt for batteri
(under dekkelet)

Kontroller på Tectus-knemodulen

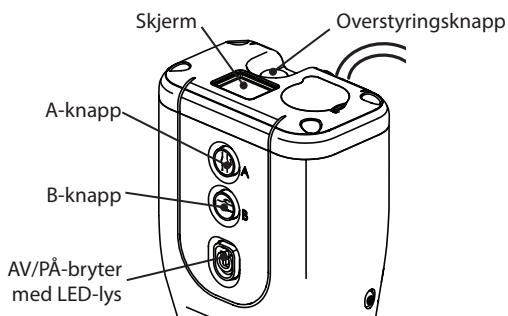

Merk... I illustrasjonene vises kun Tectus KAFO-en for høyre ben.

4 Vedlikehold

Legen er ansvarlig for å inspisere enheten jevnlig, og kommer til å avtale dette med deg.

Ikke gjør vedlikehold på enheten selv. Be heller legen eller tjenesteleverandøren gjøre det. Hvis enhetens garanti fortsatt er gyldig, låner vi deg en ny kneenhet mens vi gjør vedlikehold. Både låneenheten og enheten som er vedlikeholdt, må konfigureres av legen før du kan bruke den.

Eventuelle endringer i ytelsen til denne enheten må rapporteres til legen.

Endringer i ytelse kan omfatte:

- økt eller redusert stivhet i kneet
- ustabilitet
- nedsatt knestøtte (fri bevegelse)
- ukjente pip, varsellys, indikasjoner på skjermen eller vibrasjoner*
- eventuelle uvanlige lyder

*Enheten vibrerer når den bytter modus. Dette er normalt.



Ikke smør enheten selv. Dette gjøres under vedlikehold med egnet smøremiddel.



Ikke bruk WD40 eller noe annet vanddispersjonsmiddel på noen av de bevegelige delene som et forsøk på å fikse unormale lyder eller knirkende eller stive ledd.

Sjekk enheten før hver bruk for fysisk skade og

- tegn på slitasje
- hydraulisk lekkasje
- godt festede leddeksler
- godt festede stropper


Bytt batteri på fjernkontrollen hver sjetten måned, eller

- hvis fjernkontrollknappene for valg av modus slutter å fungere som de skal
- hvis LED-lyset på fjernkontrollen ikke lyser hver gang brukeren trykker på knappene

Se avsnitt 4.4 **Bytte batteri i fjernkontrollen**, eller be lege/tjenesteleverandør om å gjøre det hvis du ikke er i stand til å gjøre det selv.

4.1 Varsel om kritisk vedlikehold

Hvis enheten oppdager en feil, aktiveres ikonet for kritisk vedlikehold og blinker på enhetens skjerm (se bilde). Enheten forsøker å gå i **sikkerhetsmodus** med høyere enn normal fleksjons- og ekstensjonsmotstand i kneet. Samtidig begynner B-knappen å blinke rødt til feilen er løst.

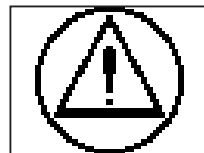

I **sikkerhetsmodusen** kan du sakte strekke ut og bøye kneet slik at du kan komme deg i sikker stilling og ta av enheten.



Hvis *sikkerhetsmodusen* ikke aktiveres, må du slutte å bruke enheten umiddelbart.

Hvis knevinkelen må justeres, kan brukeren bruke overstyringsknappen til å la enheten bøyes og strekkes ut fritt. Se avsnitt 9.9.



ADVARSEL! Bruk overstyringsknappen kun hvis det er trygt.



Hvis det oppstår feil på enheten og feilen ikke kan løses med en kald omstart (se avsnitt 4.2), eller hvis varselet om kritisk vedlikehold vises, må du ta kontakt med legen så snart som mulig, og du må ikke bruke enheten før feilen er blitt rettet og/eller vedlikehold er blitt gjort.

Varselet om kritisk vedlikehold blinker kontinuerlig og kneet forblir i denne modusen frem til feilen er løst. Hvis enheten slås av mens varselet for kritisk vedlikehold er aktivt, slås den av, men neste gang enheten slås på, begynner det å blinke igjen og fortsetter frem til feilen er løst.

4.2 Kald omstart

Ved små eller enkeltstående feil kan hard omstart forsøkes for å la enheten gjenopprette seg selv. Slik utføres kald omstart: Slå enheten AV og PÅ med AV/PÅ-knappen på knemodulen.



Ta kontakt med legen hvis feilen vedvarer.

4.3 Rengjøring

Blatchford anbefaler at enheten rengjøres daglig. Rengjør utvendige overflater med en fuktig klut og mild såpe. IKKE bruk sterke rengjøringsmidler eller blekemidler. Skal ikke i vaskemaskin eller tørketrommel, og det må ikke brukes vannslange, høytrykksspyler eller trykklufttørker.

Pass på at det ikke kommer vann inn i ladekontakten. Tørk nøye før bruk.

4.4 Bytte batteri i fjernkontrollen

Fjernkontrollen har et rundt CR 2032-batteri. Batteriet må byttes hver sjette måned, når modusbytte ikke fungerer som det skal, eller hvis LED-lyset på fjernkontrollen ikke lyser hver gang brukeren trykker på knappene.

1



Legg fjernkontrollen på flatt underlag med batteridekselet opp.

2



Skru ut begge skruene med en stjerneskrutrekker og legg dem til sides.

3



Bruk en skrutrekker med flatt hode til å løfte dekslet fra enden nærmest nøkkelringen som vist for å unngå skade på pakningen.

4



Ta ut det tomme batteriet, og kast det i henhold til lokale forskrifter om gjenvinning.



Batterier må holdes unna barn og kjæledyr. Søk legehjelp hvis batteriet svelges.

5



Pass på at siden med **+**-tegnet vender opp, og sett det nye batteriet i batterihuset ved å trykke det først mot sidefjærene og så ned i huset.

6



Pass på at overflatene på batterihuset og dekslet er rene. Rengjør med en tørr vattpinne om nødvendig.

7



Pass på at pakningen ikke brettes og at den er uten skader. Dette er for å forhindre at det trenger inn vann.

8



Sett på dekselet, skru i skruene og stram med håndmakt. Ikke stram for hardt!

Når batteriet er byttet, må du teste at alle knappene på fjernkontrollen bytter modus som de skal, og at LED-lyset lyser hver gang en knapp trykkes inn.

5 Bruksbegrensninger

Løftebelastninger

Brukerens vekt og aktivitetsnivå bestemmes av de angitte grensene.

I alle tilfeller må ikke den kombinerte vekten av brukeren og lasten overstige 100 kg.

Miljø

Unngå å eksponere Tectus KAFO-en for korrosive elementer slik som vann, syrer og andre væsker. Unngå også slipende miljøer som for eksempel inneholder sand, fordi dette kan føre til for tidlig slitasje.

Merk... Det er kun knemodulen og batteripakken som er spruttette i henhold til IP54-standard.

Skal bare brukes ved temperaturer mellom -10°C og 50°C .



Egnet for utendørs bruk

6 Lading av batteri

6.1 Informasjon om sikkerhet ved lading av batteri

-  Laderen skal aldri kobles til enheten mens enheten er i bruk.
-  Batteriet skal kun lades ved temperaturer mellom 0 °C og 35 °C.
-  Batteriladeren kan brukes i stikkontakter med spenning mellom 100 V og 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz.
-  Enhetens batteri skal kun lades med laderen og ladekabelen som følger med. Laderen skal ikke brukes til å lade annet utstyr.
-  Laderen må ha riktig støpsel for landet. Støpselet må aldri presses inn i en stikkontakt som ikke er kompatibel.
-  Før lading må brukeren sjekke at ladeplatene er tørre og rene. Skitt og smuss kan forstyrre ladingen.
-  Hvis brukeren merker uvanlige lyder eller lukter mens enheten lades, må laderen trekkes ut og både laderen og knemodulen må slås av. Rapporter problemet til legen.
-  Koblingen mellom batterimodulen og batteriladeren inneholder sterke magneter. Det må alltid holdes trygg avstand (minst 10 cm) mellom disse magnetene og gjenstander som kan bli påvirket av magnetisme, f.eks. klokker, pacemakere, bankkort og magnetisk lagrede medier.
-  Ikke la noe materiale av jern feste seg på ladeplatene.
-  Ikke ta støpselet eller batteriladeren fra hverandre.
-  Skadede støpsler eller batteriladere må umiddelbart byttes ut med deler fra Blatchford.
-  Enheten slår seg av mens den lades. Når enheten er ferdig ladet, må den slås på med AV/PÅ-knappen på Tectus-knemodulen.
-  Ikke ta ut batteriene. De kan ikke byttes ut av brukeren, og byttes ved behov under rutinemessig vedlikehold.
-  Hvis enheten er blitt utsatt for temperaturer under -10 °C, må den returneres til Blatchford slik at vi kan sjekke om batteripakken har tatt skade.

6.2 Før lading



Enheten skal ikke lades mens brukeren har den på. Tectus KAFO-en må tas av før den lades. Brukeren må ikke ta på enheten mens den fortsatt er koblet til laderen.

Brukeren må alltid sjekke at enheten har nok batteri til å vare gjennom hele dagen. Vi anbefaler at enheten lades hver dag hvis den brukes hver dag.

Før lading anbefaler vi å bytte til *låsemodus* og legge Tectus KAFO-en vannrett (på en flate eller på gulvet) med knemodulen opp og med fem graders fleksjon i kneet slik at den ligger trygt og ikke ruller til siden.

Merk... Knemodulen slår seg av automatisk så snart laderen kobles til.


6.3 Batterinivåindikator på skjermen

6.3.1 Vanlige indikasjoner

Batterinivåindikatoren vises i 5 sekunder på siden av skjermen på enheten:

- når modusen byttes
- når A- og B-knappen holdes inne samtidig

Enheten har følgende batterinivåindikasjoner:

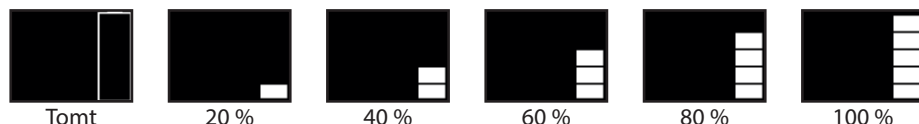

6.3.2 Atferd ved lavt batterinivå

Varsel om lavt batterinivå

Enheten varslar deg når batterinivået faller til 20 % ved å avgi to korte pip og vise varselsymbolet fulgt av én strek på skjermen. Dette varselet gjentas hvert tiende minutt og/eller hver gang brukeren trykker på en knapp, frem til batterinivået blir kritisk lavt.



Varsel om kritisk lavt batterinivå

Et kritisk lavt batterinivå indikeres med et blinkende varselsymbol og ett langt pip. Enheten går tilbake til en *sikkerhetsmodus* som er identisk den som er beskrevet i avsnitt 4.1 *Varsel om kritisk vedlikehold*.







Når varselet om kritisk lavt batterinivå vises, må du slutte å bruke enheten og ikke bruke den igjen før den er oppladet.


6.3.3 Tom skjerm etter at batteriladeren er koblet til

Hvis skjermen forblir tom etter at batteriladeren er koblet til og skrudd på, kan det hende batteriet er helt utladet. La batteriladeren være koblet til i minst 15 minutter, og sjekk ladenivået ved å koble fra laderen og koble den til igjen

6.4 Koble til og koble fra laderen

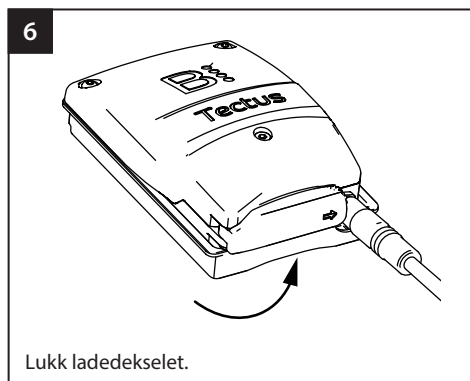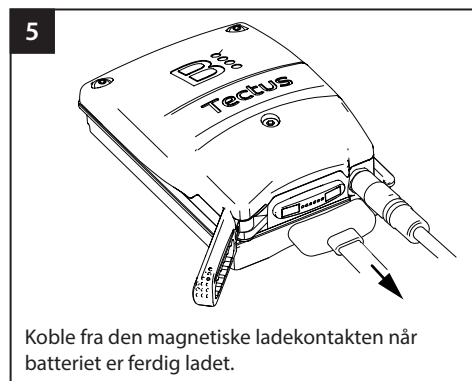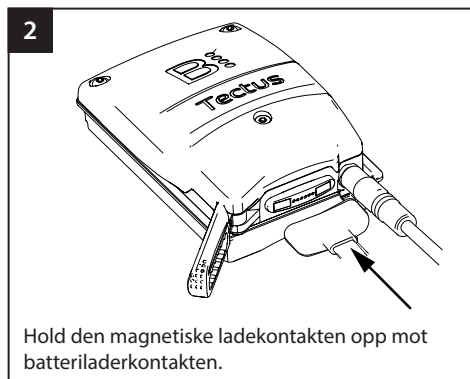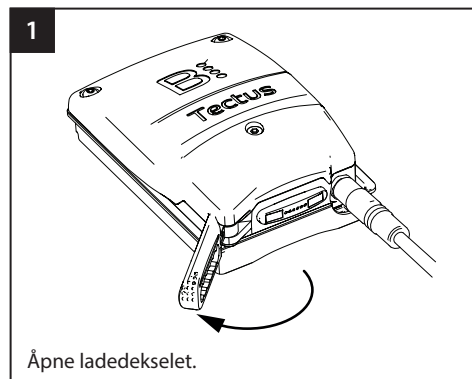

6.5 LED-lys på batteriladeren

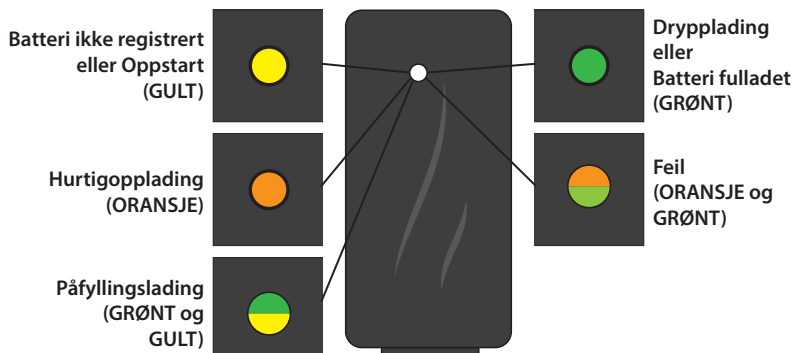


Merk... Du finner mer informasjon på baksiden av batteriladermodulen og i instruksene som følger med laderen.



Oppstartssekvens

Når laderen er satt i stikkontakten og koblet til enheten, må den slås på ved stikkontakten. Laderens LED-lys lyser i følgende fargesekvens i ca. 10 sekunder for å vise at enheten lades.

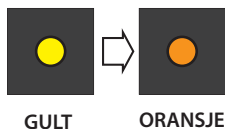

6.6 Referansetider for lading og bruk

Prosess	Tid
Tid til helt oppladet batteri (fra helt tomt).	Ca. 2 timer
Minste ladetid før bruk (fra helt tomt).	Minst 1 time
Maksimal batterivarighet fra helt oppladet og ved kontinuerlig bruk, f.eks. uavbrutt gåing. (Avhenger av temperatur)	18 timer (se merknad i og ii)

- Merknader:
- i) For at batteriet skal vare lengst mulig på én lading, anbefaler vi å slå av enheten når den ikke er i bruk.
 - ii) Brukstiden til enheten kan reduseres hvis omgivelsestemperaturen er lav eller batteriet er gammelt.

7 Slik tas Tectus KAFO-en av og på

7.1 Slik tas Tectus KAFO-en på

Merknader: i) Lad enheten før du tar den på. (Se avsnitt 6 *Lading av batteri*.)

ii) Sjekk enheten daglig for feil og mangler som kan påvirke enhetens sikkerhet og funksjon. Hvis du ser noe unormalt, må du ta kontakt med legen.

1. Åpne alle lukkestropper slik at de ikke kommer i veien for dekselåpningene.
 2. Ta av skoen.
 3. Sitt på kanten av en stol.
 4. Slå enheten PÅ. (Se avsnitt 8.)
 5. Hvis enheten slås PÅ mens den ligger horisontalt, skal den starte opp i **frimodus**. Hvis den ikke gjør det, bytter du til **frimodus** med fjernkontrollen eller knappene.
 6. Bøy Tectus KAFO-en ved kneet.
 7. Strekk ut benet litt, og før låret inn i lårdekselet.
 8. Sett foten i fotdelen, posisjoner hælen og sett leggen i leggdekselet.
 9. Fest alle stroppene. Ikke stram for hardt.
 10. Sjekk at ortosen sitter behagelig. (Endre etter behov, f.eks. passende trimmelinjer.)
 11. Ta skoen på fotdelen. (Enkelte brukere foretrekker å ta på seg Tectus KAFO-en med skoen på).
 12. Still enheten til **gåmodus** og reis deg (hold deg i noe støttende ved behov). Juster alle fester og stropper etter behov.
 13. Hvis enheten brukes over klær, pass på at stoffet er pent brettet slik at det ikke skaper ubehag.
Hvis enheten brukes under klær (f.eks. kjole, skjørt, løstsittende bukser), bør det brukes en sokk eller et tynt plagg som dekker hele lengden av benet.
-  **Pass på at klær ikke setter seg fast i de bevegelige delene til enheten.**
14. Still enheten til **sittmodus** og sett deg forsiktig.
 15. Still enheten til **frimodus** og bøy og strekk ut kneet forsiktig for å sjekke at Tectus KAFO-en sitter behagelig i hele bevegelsen.
 16. Still enheten til **gåmodus** igjen før du reiser deg.

7.2 Slik tas Tectus KAFO-en av

1. Still enheten til **sittmodus**.
2. Sett deg på kanten av en stol (støtt deg på stolen om nødvendig).
3. Still enheten til **frimodus**.
4. Ta av skoen.
5. Åpne alle stroppene.
6. Ta av Tectus KAFO-en.
7. Strekk ut KAFO-en til 5 graders knefleksjon og still enheten til **låsemodus**.
8. Slå enheten AV.
9. Legg Tectus KAFO-en vannrett (på en flate eller på gulvet) med knemodulen opp og med fem graders fleksjon i kneet slik at den ligger trygt og ikke ruller til siden.

Merk... Vi anbefaler å sette enheten til lading etter hver bruk.



Se jevnlig etter tegn på hudirritasjon, vevskade, trykksår eller ubehag på lemmet Tectus KAFO-en brukes på, og rapporter slike tegn til legen

8 Slå enheten AV/PÅ

Enheden slås av og på med AV/PÅ-knappen på enheten (Se avsnitt 3). Det er ikke noen AV/PÅ-knapp på fjernkontrollen.

Slå PÅ

Trykk på og hold inne AV/PÅ-knappen til LED-lyset lyser grønt. Enheten piper kort og vibrerer i oppstartssekvensen. Når den er ferdig, kan du slippe.



Slå AV

Trykk på og hold inne AV/PÅ-knappen til enheten piper kort og vibrerer to ganger. Deretter kan du slippe.




Oppstartssjekvens

Når enheten slås PÅ, starter den automatiske oppstartssjekvensen. Mens den pågår, endres LED-lysene og skjermen, og enheten avgir pip og vibrasjoner som vist. Sekvensen varer i omtrent 4 sekunder.

⚠ Ikke bruk enheten hvis det BLÅ LED-lyset fortsetter å blinke under og etter oppstartssjekvensen. Dette indikerer at programmeringen til enheten ikke er fullført. Ta kontakt med legen før du bruker enheten.

Enheden er PÅ og klar til bruk når standard *fri-/gåmodus* (avhengig av om enheten ligger eller står mens den starter opp) vises på skjermen (se sekvensen til høyre).

Merk... Skjermen går i dvalemodus (skjermen er tom) etter 5 sekunder uten aktivitet, men aktiveres hver gang modusen endres med A- eller B-knappene på enheten eller med fjernkontrollen.

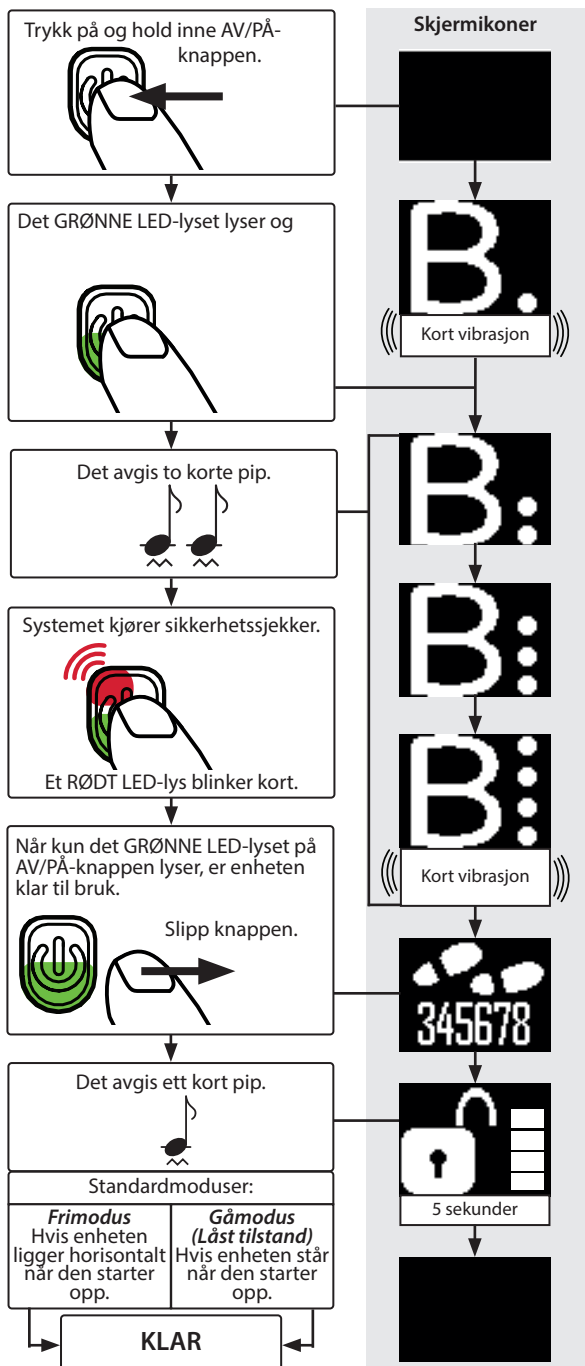

9 Bruk av Tectus-knemodulen

9.1 Brukermodus

Enheden har disse modusene som brukeren kan velge mellom:

- *Gå*
- *Sitt*
- *Trapper*
- *Lås*
- *Fri*
- *Stille*

Enheden kan bytte automatisk til disse modusene:

- *Kritisk vedlikehold*
- *Sikker*

Enheden har denne modusen som kun legen kan velge:

- *Opplæring*

9.2 Sikkerhet ved bytte av modus


9.2.1 Standard brukermodus

Etter oppstart bytter enheten som standard til **frimodus** hvis brukeren sitter, eller **låsetilstanden i gåmodus** hvis brukeren står. **Frimodus** under oppstart er kun tiltenkt å brukes mens brukeren tar på seg enheten. Brukeren må velge en annen modus (som regel **gåmodus**) før hen reiser seg etter å ha tatt på seg enheten.

9.2.2 Sikkerhetsbegrensninger for bytte av modus

Brukeren kan ikke bytte til **frimodus** mens hen går, går ned trapper eller står med låst kne. Dette er av sikkerhetsmessige årsaker, fordi brukeren kan falle hvis støtten plutselig forsvinner. Derfor er følgende modusbytter ikke mulige:


Gåmodus til frimodus

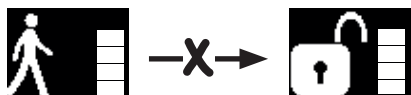


Trappemodus til sittemodus




Trappemodus til frimodus

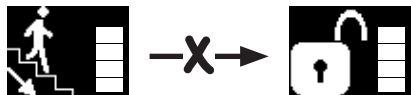

Sittemodus til trappemodus

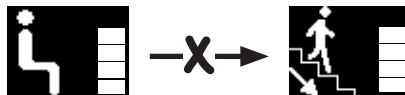

Låsemodus til frimodus

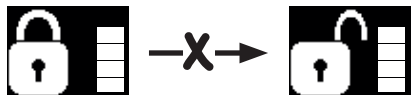

Frimodus til trappemodus



9.3 Varsel om overbelastning på enheten

Svært sjeldent og under spesielle forhold kan enheten avgi en rask, pipende lyd- og vibrasjonsalarm i opptil 15 sekunder. Dette betyr at enheten er overbelastet, enten fordi den ikke brukes som tiltenkt eller på grunn av en feil.

Når varslar om overbelastning oppstår

Hvis du (eller enheten selv) løser årsaken til overbelastningen før alarmen på 15 sekunder er over, stopper alarmen og enheten fungerer som normalt igjen.



Hvis du (eller enheten selv) ikke løser årsaken til overbelastningen før alarmen på 15 sekunder er over, tolker enheten dette som en feil og bytter automatisk til **sikkerhetsmodusen**.






Hvordan overbelastning oppstår og hvordan unngå det



I denne tabellen oppsummeres scenarioene der enheten kan bli overbelastet, og hva som kan gjøres for å fikse det.

Alarm	Årsak	Løsning
Når modusen byttes	Det kan hende du har forsøkt å bytte modus før den forrige aktiviteten var helt ferdig, og det hydrauliske systemet var ikke klart til å tilpasse seg de nye innstillingene.	Prøv å redusere belastningen på enheten til den kan utføre modusbyttet. De raske pipene skal da stoppe umiddelbart for å indikere at enheten fungerer normalt igjen. Gi alltid enheten nok tid til å respondere på kommandoer om modusbytte.
Når brukeren setter seg ned	Når brukeren setter seg, bytter enheten automatisk til en lavere motstand etter at kneet har beveget seg ca 45°. Hvis du prøver å sette deg ned for raskt og hardt, overbelastes det hydrauliske systemet når det bytter modus.	Prøv å redusere belastningen på enheten til den kan bytte til frimodus . Følg legens anvisninger om hvordan og hvor raskt du skal sette deg når du bruker enheten.
Ved feil	Hvis problemet ikke løses innen 15 sekunder, antar enheten at det har oppstått en feil og går tilbake til sikkerhetsmodus , og varselet om kritisk vedlikehold vises på skjermen på enheten.	Se avsnitt 4.1 Varsel om kritisk vedlikehold om hvordan du løser feil. Her finner du også en beskrivelse av sikkerhetsmodusen .

9.4 Aktiviteter og tilknyttede moduser

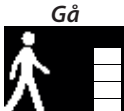Aktivitet	Modus aktivert og vist	Funksjon og prosedyre
Gå 	<i>Gå</i> 	Gir automatisk støtte i stillingsfasen og kontrollerer frigivelsen i svingfasen. Kneekstensjonsassistenten er alltid på, selv om den ikke kontrolleres av mikroprosessor.
Stå 	<i>Gå</i>  <i>Lås</i> 	Hvis du står i ro mens enheten er i <i>gåmodus</i> , støttes du opp. I stående stilling varsles enheten om bevegelser som skritt fremover eller bakover, og gir støtte deretter. Vi anbefaler at du bruker <i>låsmodusen</i> for å få nok støtte når du skal stå over lengre tid (f.eks. når du står i kø) eller i miljøer der du kan komme ut av balanse (f.eks. hvis du står i en folkemengde). Merk... <i>Låsmodus</i> er en fiksert modus, og enheten overvåker ikke bevegelser. <i>Låsmodus</i> på slås av og på manuelt.
Skritt bakover 	<i>Gå</i> 	Hvis du trår bakover eller lener deg bakover i <i>gåmodus</i> , går enheten inn i en låst tilstand som kalles Skritt bakover. Den gir deg støtte mens du får igjen balansen. Merk... <i>Skritt bakover</i> er en tilstand i <i>gåmodus</i> , og er ikke det samme som <i>låsmodusen</i> som brukeren selv kan velge. Hvis <i>opplæringsmodusen</i> er aktivert, indikerer enheten at den er i <i>Skritt bakover</i> -tilstanden ved å avgi én lang, høy pipetone og én vibrasjon. Enheten går tilbake til stående <i>låsmodus</i> først når du har gått tilbake til og forblitt i stående posisjon i minst to sekunder. Hvis <i>opplæringsmodusen</i> er aktivert, indikerer enheten dette ved å avgi to pip og vibrasjoner.
Lås 	<i>Lås</i> 	Kneet er låst mot fleksjon, men kan strekke seg ut til full ekstensjon. <i>Låsmodusen</i> forblir på til en annen modus velges, eller til den mekaniske overstyringsknappen trykkes.
Fri 	<i>Fri</i> 	Enheten gir minimal motstand i fleksjon og minimal ekstensjonsassistansemotstand i ekstensjon. <i>Frimodus</i> forblir på til en annen modus velges.  Denne modusen gir ikke nok støtte til at brukeren kan stå.

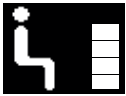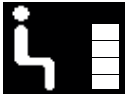Aktivitet	Modus aktivert og vist	Funksjon og prosedyre
Stående til sittende 	Sitt 	Fiksert motstand i kneet for å gi støtte idet brukeren setter seg. Geometrien i modulen sikrer best mulig støtte. Når du skal sette deg, må du manuelt aktivere sittmodusen med modusknappene på enheten eller på fjernkontrollen. Vær oppmerksom på omgivelsene rundt deg før du setter deg. Belast begge bena likt når du setter deg. Bøy deg fremover ved hoften, skyv rumpa bakover, legg hendene på armlenet (hvis det finnes) og bøy bena i en jevn bevegelse til du sitter.
Sette seg 	Sitt  Fri 	I sittmodus , to sekunder etter at brukeren har satt seg, bytter enheten automatisk til frimodus for å gjøre det mulig for brukeren å flytte på lemmet ved behov. Merk... Enheten starter opp i denne frimodusen hvis enheten startes opp mens du sitter. Mens enheten er i sittmodus , registrerer den bevegelsen når du begynner å reise deg, og låser mot fleksjon idet du reiser deg slik at du ikke kan sette deg ned igjen enten før benet er helt utstrukt eller du trykker på overstyringsknappen.
Sittende til gående 	Sitt 	Når enheten er i sittmodus , registrerer enheten bevegelsen når du reiser deg og begynner å gå, og bytter automatisk til gåmodus . Når du skal reise deg, plasserer du føttene jevnt, bøyer overkroppen fremover og støtter deg med armene idet du reiser deg. Prøv å legge vekt på ortosen, og begynn å gå.  Hvis du ikke fullfører bevegelsen og forsøker å sette deg ned igjen, låses enheten mot fleksjon.
Gå opp trapper 	Lås 	 For sikkerhetens skyld må du bytte manuelt til låsmodus før du begynner å gå opp trapper.  Brukeren må alltid støtte seg på rekkverk om mulig. Når låsmodusen brukes, gir ikke kneet etter (men det kan strekke seg ut), så du må bruke en «sett foten inntil»-bevegelse der du fører med det friske benet når du går opp trappene.

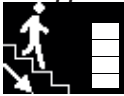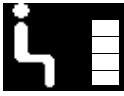Aktivitet	Modus aktivert og vist	Funksjon og prosedyre
Gå ned trapper 	Trapper  Lås 	 I <i>trappemodus</i> må du ikke forsøke å sette den ene foten foran den andre når du går nedover, før du har fått fysioterapi og gått gjennom opplæring som er overvåket og godkjent av legen.  Vær alltid forsiktig i trapper, og vær oppmerksom på omgivelsene.  Brukeren må alltid støtte seg på rekkverk om mulig.  Når du skal gå ned trapper, må enten <i>trappemodus</i> eller <i>låsmodus</i> aktiveres før du begynner å gå nedover. Når en modus er valgt, må du ikke bytte før du er ferdig med å gå ned trappen. <i>Trappemodusen</i> gir god nok støtte til at brukeren kan gå ned trappen med den ene foten foran den andre. Den har programmert fleksjonsmotstand kombinert med passende ekstensjonsforspenning. Merk... Sett kun den bakre halvdel av foten på trinnet. Legg så belastning på ortosen og press den inn i knefleksjon, trå ned med det friske benet og la ortosen flektet i kneet. Når <i>låsmodusen</i> brukes, gir ikke kneet etter. Det er låst i full ekstensjon, så du må bruke en «sett foten inntil»-bevegelse der du fører med den låste protesen når du går ned trappene.
Sette seg inn i kjøretøy 	Sitt 	 Vær alltid forsiktig rundt kjøretøy, og vær oppmerksom på omgivelsene. Aktiver <i>sittmodusen</i> når du skal sette deg inn i et kjøretøy. Enheten bytter til <i>fritilstanden</i> av <i>sittmodusen</i> når låret er horisontalt. (Ikke det samme som <i>frimodusen</i>.) Da kan du manøvrere protesen til en behagelig og trygg posisjon. Merk... Hvis lårets vinkel ikke er horisontal, f.eks. på grunn av vinkelen på setet, bytter enheten til <i>sitt til stå-tilstanden</i> av <i>sittmodusen</i> og kan kun posisjoneres ved bruk av den mekaniske overstyringsknappen.
Gå ut av kjøretøy 	Sitt 	Før du stiger ut av et kjøretøy, må du passe på at enheten er i <i>sittmodus</i> slik at du støttes idet du går fra sittende til stående når du stiger ut. Enheten er klar til å bytte automatisk til <i>gåmodus</i>.

Aktivitet	Modus aktivert og vist	Funksjon og prosedyre
Kjøring 	<i>Fri</i> 	⚠ Du må ikke bruke kontrollknappene eller fjernkontrollen til enheten mens du kjører. ⚠ Advarselen i dette dokumentet og eventuelle nasjonale forskrifter må følges hvis brukeren tenker å kjøre mens hen har på seg en Tectus KAFO. ⚠ Kun det friske benet skal brukes til å kjøre bil. Når du skal kjøre, må du bytte manuelt til <i>frimodus</i> med fjernkontrollen eller kontrollknappene.
Sikkerhetsmodus		Enheden går tilbake til <i>sikkerhetsmodus</i> hver gang den oppdager feil eller kritisk lavt batterinivå, eller hvis advarselen om vedlikehold er utløpt. I <i>sikkerhetsmodus</i> bytter enheten til høy knefleksjonsmotstand.
Kritisk vedlikehold		Du finner mer informasjon i avsnitt 4.1 <i>Varsel om kritisk vedlikehold</i> og avsnitt 6.3.2 <i>Atferd ved lavt batterinivå</i>.
Opplæring	<i>Opplæring</i>	Merk... Det er kun legen som kan slå på opplæringsmodusen via appen. I <i>opplæringsmodus</i> avgir enheten lyder og vibrasjoner for å fortelle deg når driftstilstanden i <i>gåmodus</i> endrer seg. Dette er for å hjelpe deg med å lære hvordan du bruker enheten. For eksempel: Når du tar et steg bakover fra stillestående for å aktivere <i>Gå bakover</i>-tilstanden, avgir enheten et langt pip og vibrerer for å bekrefte at <i>Gå bakover</i>-tilstanden er valgt. Når du stopper etter å ha gått, avgir enheten to korte pip og vibrerer for å bekrefte at <i>låsemodus</i> er valgt.

9.5 Handlinger og enhetsindikasjoner

Bruk av enheten og fjernkontrollknappene

Enheden betjenes manuelt enten med A- og B-knappene på enheten eller med knappene på fjernkontrollen. Knappen/knappene som trykkes, samt hvor lenge de holdes inne (kort trykk, langt trykk, svært langt trykk) bestemmer handlingen som velges.

Merk... Knappene på fjernkontrollen har kun to alternativer: kort eller langt trykk.

Enheden avgir et unikt mønster av pip og vibrasjoner for hver av de tre varighetene og viser et ikon på skjermen som forklart i denne tabellen:

Navn	Varighet	Pip med vibrasjoner	Ikon på skjermen	Symbol som brukes i dokumentet
Kort trykk	Maks. 2 sekunder			
Langt trykk	2–4 sekunder			
Svært langt trykk	Lenger enn 4 sekunder			


Enhetsindikasjoner

Enheden sier i fra om at den forespurte handlingen, f.eks. modusbytte, er registrert, ved å avgi lyd- og/eller vibrasjonssignaler som vist i denne tabellen:

Type indikasjon	Symbol som brukes i dokumentet		
Lyd (pip)		Kort	Lang
	Høy tone		
	Middels tone		
	Lav tone		
Vibrasjon			
På skjermen		Du finner en detaljert beskrivelse i avsnitt 9.4, 9.6 og 9.7.	
LED-lys på AV/PÅ-knappen		Du finner en detaljert beskrivelse i avsnitt 8.	

9.6 Modusbytte på enheten med A- og B-knappene på Tectus-modulen


Når oppstartssekvensen er ferdig, kan enheten styres med knappkombinasjoner på Tectus-knemodulen eller fjernkontrollen.

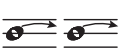Moduser	Aktivering (på enheten)	Tidssignaler		Enhetens respons		
		På skjermen	Pip og vibrasjon	Pip	Vibrasjon	Symbol
<i>Gå</i>	Trykk kort på A-knappen 		1 	2 × korte, lave toner 	2 × korte 	
<i>Sitt</i>	Trykk lenge på B-knappen 		1+2 	1 × kort, middels tone 	1 × kort 	
<i>Trapper</i>	Trykk kort på B-knappen 		1 	2 × korte, middels toner 	2 × korte 	
<i>Fri</i>	Trykk kort på A- og B-knappen 		1 	1 × lang, middels tone 	1 × lang 	
<i>Lås</i>	Trykk lenge på A-knappen 		1+2 	2 × lange, middels toner 	2 × lange 	
<i>Stille</i>	Trykk svært lenge på A-knappen 		1+2+3 	2 × korte, middels toner 	2 × korte 	

Merk... Ikke hold inne B-knappen i mer enn fire sekunder. Da slås **Bluetooth®** på. Dette vises ved at av/på-knappen blinker blått og lyser solid grønt og avgir tre lave toner og vibrasjoner. Dette er ikke en brukerfunksjon, så den må være av. For å slå den av må du slå av og så på igjen enheten med AV/PÅ-knappen (se avsnitt 8) eller holde inne B-knappen i mer enn fire sekunder.



9.7 Modusbytte på enheten med fjernkontrollen

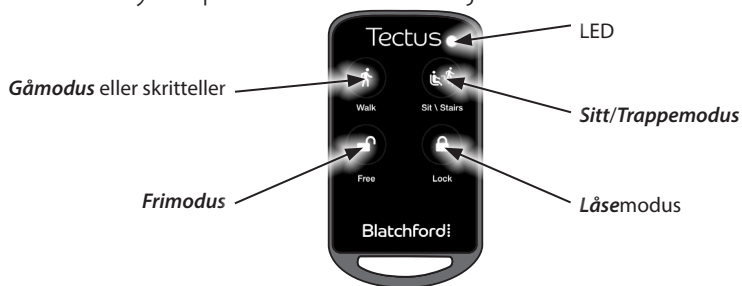

Moduser	Aktivering (på fjernkontrollen)	Tidssignaler		Enhetens respons		
		På skjermen	Pip og vibrasjon	Pip	Vibrasjon	Symbol
Gå	Trykk kort på Gå-knappen		1	2 x korte, lave toner	2 x korte	
Sitt	Trykk kort på Sitt/Trapperknappen		1	1 x kort, middels tone	1 x kort	
Trapper	Trykk lenge på Sitt/Trapperknappen		1+2	2 x korte, middels toner	2 x korte	
Fri	Trykk kort på Fri-knappen		1	1 x lang, middels tone	1 x lang	
Lås	Trykk kort på Lås-knappen		1	2 x korte, middels toner	2 x korte	

9.8 Flere fjernkontrollfunksjoner

Moduser	Aktivering (på fjernkontrollen)	Tidssignaler		Enhetens respons		
		På skjermen	Pip og vibrasjon	Pip	Vibrasjon	Symbol
Skritteller	Trykk lenge på Gå-knappen		1+2	-	-	
Tilkoblingskode	Trykk lenge på Lås-knappen		1+2	-	-	

9.9 Mekanisk overstyring

Kneet kan flekteres i alle moduser ved å trykke på den manuelle overstyringsknappen øverst på kontrollmodulen. Knappen må holdes inne helt til ønsket knefleksjonsvinkel er nådd.



Ikke bruk gjenstander som skrutrekkere og pinner til å trykke inn overstyringsknappen.




Denne funksjonen skal kun brukes i spesielle tilfeller (f.eks. ved feil eller tomt batteri).

Når overstyringsknappen slippes, går knefleksjonen tilbake til samme motstand som den hadde før brukeren trykket på knappen.

Merk... Den hydrauliske modulen er laget for å alltid tillate fri ekstensjon av benet.



Pass alltid på så fingrene ikke kommer i klem.

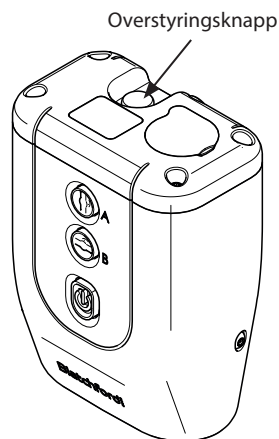

10 Transport og oppbevaring

Transport

1. Enheten må være av og forsvarlig pakket under transport slik at
 - a) den ikke kan bli slått på utilsiktet,
 - b) Tectus KAFO-en / enheten er godt beskyttet mot skade.
2. Før Tectus sendes, må den settes i låsemodus i utstrakt posisjon. Tectus KAFO-en må legges i en egen bag (hvis tilgjengelig) og pakkes godt i en egnet eske.
3. Ta kontakt med Blatchford før du sender Tectus KAFO-en hvis det er åpenbare fysiske skader på batteripakken.

Oppbevaring

1. Vi anbefaler å oppbevare enheten stående og i **låsemodus** før du slår den av.
2. Hvis Tectus KAFO-en skal oppbevares stående, må den sikres slik at den ikke faller.

Produsentens erklæringer og juridisk informasjon

FCC Compliance Statement



This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, Including interference that may cause undesired operation.

Note... Contains pre-approved **Bluetooth®** module: FCC ID: QQQ-GM220P IC: 5123A-GM220P.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation. This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Responsible party: Blatchford Inc.

1031 Byers Road, Miamisburg, OH 45342

800-548-3534 (toll free) | 937-291-3636

customerservice@blatchfordus.com

RSS Compliance Statement

This device complies with RSS 210 of ISED Canada.

Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause interference, and
2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

L' utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes:

1. il ne doit pas produire d'interférence et
2. l' utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter toute interférence radioélectrique reçu, même si celle-ci est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's website Blatchford Inc. 1031 Byers Road, Miamisburg, OH 45342.

800-548-3534 (toll free) | 937-291-3636 customerservice@blatchfordus.com

Erstatningsansvar

Produsenten anbefaler å bruke enheten kun under de angitte forholdene og til de tiltenkte formålene. Enheten må vedlikeholdes i henhold til bruksanvisningen som følger med enheten. Produsenten er ikke erstatningsansvarlig for skader forårsaket av delekombinasjoner som ikke er autorisert av dem.

CE-samsvar

Dette produktet oppfyller kravene i EU-forordningen 2017/745 om medisinsk utstyr. Dette produktet er klassifisert som en klasse I-enhet i henhold til klassifiseringsreglene beskrevet i vedlegg VIII til forskriften. EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettside: www.blatchfordmobility.com



Medisinsk enhet



Til flerbruk av én pasient

Garanti

Denne enheten har en garanti på 36 måneder.

Enheten skal inspiseres etter 2 uker, 3 måneder, 6 måneder, 12 måneder og 24 måneder.

Brukeren må være klar over at endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent, kan annullere garantien, driftslisensene og unntakene.

Det ovennevnte kan variere fra marked til marked. Rådfør deg med din lokale representant for flere detaljer.

Se nettstedet til Blatchford for gjeldende full garantierklæring.

Rapportering av alvorlige hendelser

Hvis det mot formodning skulle oppstå en alvorlig hendelse relatert til denne enheten, skal hendelsen rapporteres til produsenten og den relevante myndigheten i landet ditt.

Miljøhensyn



Dette symbolet angir at produktet inneholder elektriske/elektroniske komponenter og/eller batterier som ikke skal kastes i restavfall eller brennes på slutten av levetiden.

På slutten av produktets levetid skal alle elektriske/elektroniske komponenter og/eller batterier resirkuleres eller avhendes i henhold til gjeldende lovverk for håndtering av WEEE (avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr), eller tilsvarende lokale

forskrifter. Det som er igjen av produktet skal også resirkuleres hvis det er mulig i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.

Blatchford tilbyr en returtjeneste for å forhindre potensiell skade på miljøet eller menneskers helse grunnet ukontrollert avfallshåndtering. Ta kontakt med kundeservice for detaljer.

Varemerkeanerkjennelser

Tectus og Blatchford er registrerte varemerker som tilhører Blatchford Products Limited.

Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG Inc., og Blatchfords bruk av slike merker er underlagt lisensavtale Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

<https://www.blatchfordmobility.com/locations/distributors>

Blatchford Products Ltd.

Unit D Antura
Bond Close
Basingstoke
RG24 8PZ
UNITED KINGDOM
Tel: +44 (0) 1256 316600
Fax: +44 (0) 1256 316710
Email: customer.service@blatchford.co.uk
www.blatchfordmobility.com

Blatchford Europe GmbH

Am Prime-Parc 4
65479 Raunheim
GERMANY
Tel: +49 (0) 9221 87808 0
Fax: +49 (0) 9221/87808 60
Email: info@blatchford.de
www.blatchfordmobility.com

Email: contact@blatchford.fr
www.blatchfordmobility.com

Endolite India Ltd.

Endolite India Ltd.
B-217, UPPER GROUND
FLOOR AND FIRST FLOOR
Naraina Industrial Area
Phase 1
New Delhi 110 028
INDIA
Tel: +91 (011) 45689999
Mobile: +91-9311566671
E-Mail: info@endoliteindia.in

Blatchford Inc.

1031 Byers Road
Miamisburg
Ohio 45342
USA
Tel: +1 (0) 800 548 3534
Fax: +1 (0) 800 929 3636
Email: info@blatchfordus.com
www.blatchfordmobility.com



Blatchford Europe GmbH
Am Prime-Parc 4
65479 Raunheim Germany



Blatchford Products Ltd.
Unit D Antura, Bond Close, Basingstoke RG24 8PZ, UK.

Patent Pending: EP22187950.5

